



Fotele okulistyczno
-laryngologiczne

FL-02
FO-02



Fotele okulistyczno-laryngologiczne

FL-02 FO-02

Przeznaczenie

Fotele okulistyczno-laryngologiczne FL-02 i FO-02 przeznaczone są do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego lub okulistycznego.

Fotel FL-02



Fotel FO-02



Budowa standardowa

- Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002
- Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002
- Tapicerka beżowa, siedzisko, oparcie pleców i podgłówek pokryte skajem w bogatej kolorystyce określonej we wzorniku Famed Żywiec Sp. z o.o.
- Obrót blokowany jest mechanizmem śrubowym
- Profilowany podgłówek posiada ręczną regulację wysokości i kąta nachylenia

Zalety foteli

- Fotele posiadają możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo)
- W fotelu FO-02 regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą
- Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela FL-02 realizowane są siłownikami elektrycznymi ze sterownika nożnego
- W fotelach FO-02 oraz FL-02 podrażki są odchylane i odejmowane
- Zastosowane materiały tapicerskie, elementy tworzywowe, jak również powłoki ochronne lakierowane i chromowane są łatwe do utrzymania w czystości i mogą być dezynfekowane

Standardowe funkcje i rozwiązania



Odchylane i odejmowane podrażki. Możliwość odchylania i odejmowania podrażek pozwala na wygodny dostęp do pacjenta.



Regulacja podgłówka



Pokręto regulacji podgłówka i dźwignia regulacji oparcia pleców FO-02



Podnózek do fotela FL-02 (wyposażenie opcjonalne)

Dane techniczne

Szerokość siedziska	540 mm
Regulacja wysokości siedziska FL-02	500 mm do 650 mm
Regulacja wysokości siedziska FO-02	500 mm do 640 mm
Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FL-02	90°
Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FO-02	45°
Regulacja wysuwu podłóżka	110 mm
Obrót siedziska	±90°
Dopuszczalne obciążenie foteli	160 kg
Zasilanie FL-02	230 V~, 50/60 Hz

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska


Centrala:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Dział Handlowy:
tel.: +48 33 866 63 08
tel.: +48 33 866 63 10
tel.: +48 33 866 63 12
tel.: +48 33 866 63 17
fax: +48 33 861 30 79


sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl




Funkcje fotela FL-02 regulowane za pomocą sterownika nożnego

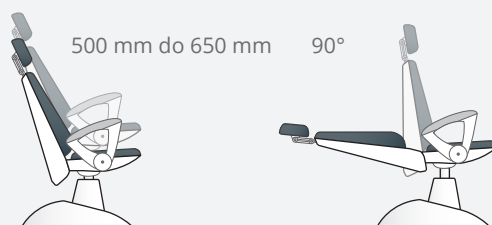

Funkcje fotela FO-02 regulowane za pomocą pompy nożnej

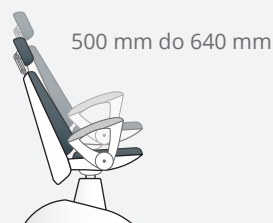

Funkcje foteli regulowane manualnie

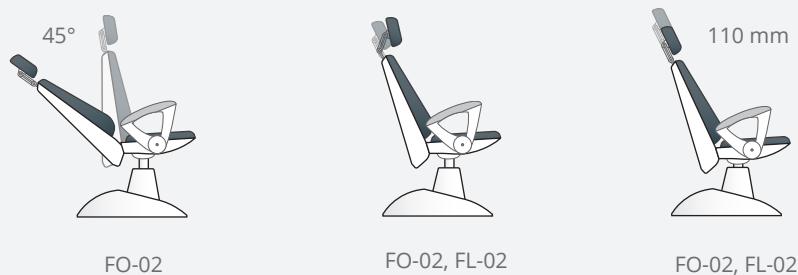

Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych

Edycja 04/2016/01. Zastrzeżenie możliwości modyfikacji w wyniku postępu technicznego.

