



FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

KATALOG
PRODUKTÓW

www.famed.com.pl

Produkty zostały wykonane z materiałów
o właściwościach antybakteryjnych.



SPIS TREŚCI

1. ŁÓŻKA PORODOWE

- **FAMED FREYA**

Innowacyjne, w pełni elektryczne połączenie łóżka szpitalnego i porodowego.

- **FAMED ROSSA**

Wygodne, wytrzymałe funkcjonalne łóżko porodowe ze sterowaniem elektrycznym.

- **FAMED FIONA**

Ekonomiczne i komfortowe łóżko porodowe bez sterowania elektrycznego.

2. FOTELE GINEKOLOGICZNE

- **FAMED FG-04**

Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie.

- **FAMED FG-07**

Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości.

- **FAMED m4000**

Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie z pamięcią

3. FOTELE ZABIEGOWE

- **FAMED FL-02**

Fotel okulistyczno-laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości.



Famed FREYA

INNOWACYJNE, W PEŁNI ELEKTRYCZNE POŁĄCZENIE

ŁÓŻKA SZPITALNEGO I PORODOWEGO



Pobierz katalog!

Famed FREYA to unikalny produkt, spełniający jednocześnie funkcję łóżka szpitalnego (zgodność z normą PN-EN 60601-2-52) oraz łóżka porodowego - rozwiązanie wygodne oraz ekonomiczne. Uniwersalność ta jest możliwa dzięki niezależnym układom sterowania (panel centralny, pilot przewodowy, zewnętrzne i wewnętrzne panele sterujące czy opcjonalne sterowniki nożne) oraz szerokiej palecie wyposażenia dodatkowego. Zmiana pozycji lub konfiguracji produktu jest możliwa w ciągu kilku sekund, a samo leże wsparte jest na stabilnej konstrukcji kolumnowej. Łóżko posiada wbudowany akumulator, który pozwala zachować pełną funkcjonalność (kilka cykli) w sytuacji awaryjnej.



UNIWERSALNOŚĆ

Famed FREYA może szybko przeobrazić się z łóżka szpitalnego w łóżko porodowe, spełnia jednocześnie normę PN-EN 60601-2-52 oraz posiada wygodne, opuszczane poręcze boczne. W podstawie łóżka znajdują się miejsca na odłożenie nieużywanych akcesoriów, a wszystkie przewody i elementy sterujące są osłonięte lub schowane, aby ułatwić czyszczenie i dezynfekcję. Famed FREYA jest łóżkiem w pełni sterowanym elektrycznie.



BEZPIECZEŃSTWO

Famed FREYA to łóżko o stabilnej, kolumnowej konstrukcji. Części tworzywowe wykonano w bakterioostatycznej technologii pSilver™, materace zaś z tkanin antybakteryjnych, z klejonymi szwami. Wszystkie akcesoria mocowane są w pewny i stabilny sposób, zapewniając bezpieczne podparcie podczas akcji porodowej. Łóżko osiąga bardzo niską wysokość minimalną, która ułatwia wchodzenie i schodzenie z łóżka.



BLISKOŚĆ MATKI I DZIECKA

Wykorzystanie w jednej sali zarówno łóżka porodowego Famed FREYA, jak i łóżeczka dla noworodków, pozwala stworzyć matce i dziecku wyjątkowe warunki po porodzie. Matka może nie tylko zmieniać ustawienie pozycji łóżka, ale także w bezpieczny sposób przekładać dziecko, lub odkładać je z powrotem do łóżeczka.

1





WŁAŚCIWOŚCI

Wyposażenie:

- komplet akcesoriów w standardzie: wielopozycyjne podpory kolan, składane uchwyty rąk, podpory stóp,
- komplet materacy w standardzie - w tym materac dla noworodka, szerokie leże, które umożliwia komfortowy wypoczynek matce wraz z dzieckiem,
- elektryczne sterowanie wysokością, oparciem pleców, siedziskiem oraz pozycją Trendelenburga i anti-Trendelenburga,
- elektryczny wysuw i chowanie sekcji nożnej (opcja),
- bardzo komfortowe warunki przed, po i w trakcie porodu.

Pozycje porodowe:

- pozycja półsiedząca (1),
- pozycja kuczna z zastosowaniem uchwytu (2),
- pozycja półsiedząca,
- pozycja siedząca (3),
- pozycja boczna (4),
- pozycja horyzontalna (5),
- pozycja tylna z wyciągiem (6),
- badanie ginekologiczne.



Długość 2165 mm | Szerokość całkowita 965 mm | Wysokość minimalna 595 mm | Wysokość maksymalna 975 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°
Regulacja segmentu udowego 30° | Pozycja Trendelenburga 20° | Pozycja anti-Trendelenburga 20° | Maksymalne obciążenie 250 kg

Famed ROSSA



WYGODNE, WYTRZYMAŁE I FUNKCJONALNE

ŁÓŻKO PORODOWE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM

Łóżko porodowe Famed ROSSA (LM-01.4) przeznaczone jest dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych zarówno w okresie przedporodowym, porodowym jak i połogowym. Łóżko porodowe z łatwością można przekształcić w fotel porodowy zapewniający rodzącej wygodną pozycję w czasie porodu. Kompaktowa konstrukcja sprawdzi się również w mniejszych placówkach. Famed ROSSA oferuje ciągłą, niezawodną pracę (kilka cykli) dzięki wbudowanemu akumulatorowi, który świetnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych.



OPCJE STEROWANIA

Łóżkiem sterować można z paneli w poręczach bocznych, które umożliwiają regulację wysokości, oparcia pleców, włączanie i wyłączanie podświetlenia oraz aktywację alarmu. Dodatkową funkcjonalność zapewnia pilot, który oprócz regulacji wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i ud posiada również zaprogramowaną pozycję do schodzenia z łóżka oraz pozycję egzaminacyjną i CPR. Łatwe sterowanie zapewnia również sterownik nożny.



BOGATE WYPOSAŻENIE

Bogate wyposażenie pozwala przyjąć wiele pozycji porodowych, a także umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań okołoporodowych - rektoskopowych, ginekologicznych czy palpacyjnych. W podstawowym wyposażeniu znajdziemy uchwyty dla rąk, oparcia stóp, podkolanniki oraz misę ze stali nierdzewnej. Wyposażenie można zamontować na uniwersalnych szynach na akcesoria. Łóżko posiada komplet materacy zabezpieczony przed wnikaniem do środka cieczy.



BEZPIECZEŃSTWO

Stabilne poręcze montowane są do oparcia pleców i posiadają możliwość opuszczenia ich w razie potrzeby. Poliuretanowe nakładki na uchwytych rąk zapobiegają ślizganiu się dłoni i zapewniają pewne oparcie w trakcie porodu. Wszystkie elementy tworzywowe oraz lakierowane wykonaliśmy z użyciem środków antybakteryjnych w technologii pSilver™.



Długość 2170 mm | Szerokość całkowita 1080 mm | Wysokość minimalna 615 mm | Wysokość maksymalna 985 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°
Regulacja segmentu udowego 17° | Pozycja Trendelenburga 12° | Pozycja anti-Trendelenburga 5° | Maksymalne obciążenie 230 kg




Famed FIONA



EKONOMICZNE I KOMFORTOWE

ŁÓŻKO PORODOWE BEZ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

Łóżko porodowe o doskonałym stosunku jakości do ceny. Solidna, stabilna i łatwa w czyszczeniu oraz dezynfekcji konstrukcja, a także brak konieczności podłączania do prądu, gwarantują pełną niezawodność. To proste łóżko porodowe z łatwością przerodzi się w fotel porodowy służąc pacjentce i personelowi medycznemu na każdym etapie porodu. Manualne sterowanie, duże koła, wysoka jakość wykonania czy bakteriostatyczna technologia pSilver™ sprawiają, że łóżko porodowe Famed FIONA (LM-01.5) sprawdza się w każdych warunkach.

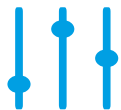

OPCJE STEROWANIA

Regulacja wysokości leża realizowana jest poprzez pompę hydrauliczną za pomocą dźwigni nożnej. Dodatkowo dzięki sprężynom gazowym z blokadą, możliwa jest regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz pochylenie oparcia pleców.



BOGATE WYPOSAŻENIE

Łóżko porodowe wyposażone jest w zestaw dwóch materacy, materacyk dla noworodka, uchwyty rąk, podpory na nogi, podkolanniki oraz misę ze stali nierdzewnej. Montaż i demontaż akcesoriów ułatwia dedykowana szyna. Konstrukcja jest stabilna i wytrzymała, a wysoka jakość zastosowanych materiałów ochronnych i technologia pSilver™ zapewnia wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie oraz bezpieczeństwo dla matki i dziecka.



SZYBKA ZMIANA POZYCJI

Łóżko Famed FIONA w szybki sposób może zostać przekształcone w miejsce do przeprowadzenia porodu. Usunięcie materaca z sekcji nóg i prosty demontaż szczytu umożliwia zmianę konfiguracji i uzyskanie wygodnej pozycji porodowej. To uniwersalne rozwiązanie, które służy pacjentce i personelowi medycznemu na każdym etapie porodu.



Długość 2170 mm | Szerokość całkowita 1080 mm | Wysokość minimalna 580 mm | Wysokość maksymalna 940 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°
Pozycja Trendelenburga 12° | Pozycja anty-Trendelenburga 5° | Maksymalne obciążenie 170 kg






Famed FG-04



FOTEL GINEKOLOGICZNY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ

Fotel na podstawie mobilnej z centralną blokadą układu jezdnego ułatwia sprawne przemieszczanie fotela po gabinecie, a wbudowane siłowniki elektryczne pozwalają na płynną zmianę i utrzymanie pozycji, bez wysiłku ze strony personelu. Predefiniowane pozycje i możliwość zapisu własnego ustawienia przyspiesza pracę z pacjentem. Fotel posiada opcjonalne zasilanie akumulatorowe, które pozwala na wykonanie kilku cykli ruchów w awaryjnych sytuacjach.

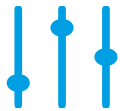

STEROWANIE

Wymagane funkcje fotela można uzyskać za pomocą wbudowanych siłowników elektrycznych sterowanych pilotem lub sterownikami nożnymi (opcjonalnie). Przy pomocy jednego przycisku możemy ustawić fotel w pozycji Trendelenburga, pozycji do wejścia/zejścia oraz zaprogramować wybraną pozycję. Elektryczne regulacje obejmują: zmianę wysokości fotela, regulację kąta siedziska oraz oparcia pleców.



WYGODA

Pozycja fotelowa, obsługiwana jednym przyciskiem na pilocie, umożliwia uzyskanie bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska, co znacznie ułatwi pacjentce siadanie na nim i opuszczanie go. Fotel posiada możliwość zaprogramowania wybranej pozycji i aktywowania jej jednym przyciskiem na pilocie. Dodatkowo bezszwowa tapicerka i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych materiały w technologii pSilver™ ułatwią utrzymanie fotela w czystości.



BOGATE WYPOSAŻENIE

Fotel wyposażony jest w misę ginekologiczną ze stali nierdzewnej, rolkę papieru podkładowego umieszczoną na uchwycie w zasobniku pod oparciem pleców oraz listwy do mocowania wyposażenia w siedzisku i oparciu. Można go wyposażać w segment podudzia (demontowalny), podkolanniki, podnóżki, sterownik nożny oraz misę urologiczną. Standardowe listwy akcesoryjne pozwalają na zastosowanie innych typowych akcesoriów specjalistycznych czy uchwytów.



Długość 1750 mm | Szerokość całkowita 745 mm | Wysokość minimalna 560 mm | Wysokość maksymalna 860 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 65°
Pozycja Trendelenburga 10° | Pozycja anti-Trendelenburga 65° | Maksymalne obciążenie 200 kg



Famed FG-07

FOTEL GINEKOLOGICZNY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Fotel sterowany mechanicznie przy użyciu siłowników, wspomaganych sprężyną gazową z blokadą. Dodatkowo wzbogacony w elektryczną regulację wysokości za pomocą sterownika nożnego, co pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia pracę personelu.



ZMIANA POZYCJI

Za pomocą sprężyn gazowych możliwa jest zmiana pozycji fotela według potrzeb, a wysokość fotela regulowana jest elektrycznie. Dzięki sprężynom gazowym z blokadą można płynnie regulować nachylenie oparcia pleców oraz przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy których regulujemy również ustawienie siedziska.



JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Bezszwowa tapicerka i kształty osłon ułatwiają utrzymanie fotela w czystości. Zastosowane materiały są w 100% odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość personalizacji fotela przez wybór koloru tapicerki z szerokiej palety kolorystycznej.



BOGATE WYPOSAŻENIE

Fotel w podstawowej wersji wyposażony jest w misę ginekologiczną ze stali nierdzewnej, uchwyt papieru za oparciem pleców oraz listwy do mocowania wyposażenia w siedzisku i oparciu pleców. Dodatkowo można doposażyć go w podkolanniki, podręczniki, podnóżki, a także w misę urologiczną.




Długość 1745 mm | Szerokość całkowita 780 mm | Wysokość minimalna 660 mm | Wysokość maksymalna 1060 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 70°
Pozycja Trendelenburga 18° | Pozycja anty-Trendelenburga 14° | Maksymalne obciążenie 175 kg



Famed m4000

FOTEL GINEKOLOGICZNY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ

Nowoczesny, ergonomiczny i precyzyjny fotel ginekologiczny, zaprojektowany dla komfortu pacjentki i wygody personelu. Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej łączy trwałość z eleganckim wyglądem. Kompaktowa podstawa dopasowuje się do każdej przestrzeni, a regulowane stopki poziomujące zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Elektryczna regulacja wszystkich funkcji umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie sekcji, a pamięć pozycji usprawnia pracę i poprawia ergonomię.

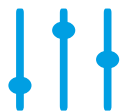

STEROWANIE

Sterowanie odbywa się za pomocą pilota przewodowego z kolorowym wyświetlaczem oraz sterownika nożnego. Czytelne ikony i spójna kolorystyka przycisków gwarantują szybką, intuicyjną obsługę. Funkcja pamięci pozwala zapisać do 12 pozycji (po 3 dla każdego z 4 profili). Wyświetlacz informuje o aktualnym położeniu sekcji, wybranym profilu i aktywnej pozycji pamięci. Synchroniczna praca silników w trybie zapamiętanych pozycji umożliwia szybkie i płynne pozycjonowanie fotela.



WYGODA

Fotel oferuje płynną elektryczną regulację wysokości, oparcia pleców, sekcji miednicy i podnóżków. Tapicerka o grubości 50 mm zapewnia wysoki poziom komfortu, a zagłówek z magnetycznym mocowaniem dba o odpowiednie podparcie głowy. Tyły elementów tapicerowanych wykonane są z tworzywa sztucznego, co ułatwia utrzymanie czystości. Uchwyt na rolkę papieru pozwala na wygodne rozwinięcie papieru ochronnego – zarówno na siedzisko, jak i na całe oparcie.



BOGATE WYPOSAŻENIE

W ofercie dostępne są systemy podparcia nóg Comfort i Goepel (manualne lub elektryczne, pokrycie z poliuretanu lub skóry syntetycznej) oraz opcjonalne podnóżki płytowe o różnej długości i podpórki pod pięty. Fotel można doposażyć w misę ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, pokrowiec ochronny oraz mobilną podstawę na czterech kółkach. Dostępne są też akcesoria, m.in. uchwyty do lamp LED i kolposkopów (Kaps, Zeiss, Leisegang, Atmos), stoliki i zestawy ginekologiczne, wieszak na akcesoria oraz podpórki rąk.

Długość 1330 mm | Szerokość siedziska 550 mm | Wysokość minimalna 550 mm | Wysokość maksymalna 900 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 50°
Pozycja Trendelenburga 20° | Pozycja anty-Trendelenburga 20° | Maksymalne obciążenie 250 kg



Famed FL-02



FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Fotel okulistyczno-laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości i oparcia pleców oraz możliwością obrotu nawet o 90°.



STEROWANIE ELEKTRYCZNIE

Elektrycznie dostępne funkcje pozwalają zaoszczędzić czas i ułatwiają pracę personelu w gabinecie. Regulacje odbywają się za pomocą wygodnego w obsłudze sterownika nożnego.



MOŻLIWOŚCI

Fotel posiada możliwość obrotu siedziska o 90° w stosunku do podstawy, co ułatwia dostęp dla aparatury diagnostycznej. Ponadto na ergonomię pracy pozytywnie wpływa regulowany wielopłaszczyznowo zagłówek oraz odchylane lub odejmowane podręczki, pozwalające na wygodny dostęp do pacjenta.



JAKOŚĆ

Bezszwowa tapicerka zapewnia wieloletnie użytkowanie oraz wygodę pacjenta. Konstrukcja fotela wykonana jest ze stali pokrytej lakierem proszkowym, a osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska z tworzywa ABS, które dzięki technologii **pSilver™** ułatwiają dbanie o higienę w gabinecie.



Długość 710 mm | Szerokość tapicerki 540 mm | Wysokość minimalna 500 mm | Wysokość maksymalna 650 mm | Kąt uniesienia oparcia pleców 90°
Maksymalne obciążenie 160 kg





MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

łóżek porodowych oraz foteli ginekologicznych

Wzory wklejek do łóżka porodowego Famed FREYA



Podstawowy wzór - Magnolia Flower



Sailor blue



Classic blue



Famed blue



Turquoise



Aquamarine



Alabaster





Sunny yellow



Fuchsia rosse

Kolory tapicerek do łóżka porodowego Famed FREYA

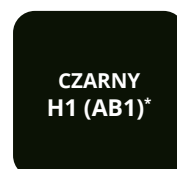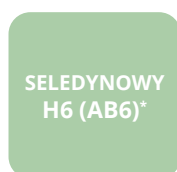



	Famed FREYA (LM-01.3)	Famed ROSSA (LM-01.4)
Długość	2165 mm	2170 mm
Szerokość całkowita	965 mm	1080 mm
Regulacja wysokości	595 - 975 mm	615 - 985 mm
Kąt uniesienia oparcia pleców	70°	70°
Kąt uniesienia siedziska	30°	17°
Pozycja Trendelenburga	20°	12°
Pozycja anty-Trendelenburga	20°	5°
Maksymalne obciążenie	250 kg	230 kg
Sterowanie	pilot przewodowy, panel centralny, zewnętrzne i wewnętrzne panele sterujące oraz sterowniki nożne (opcjonalnie)	panele w poręczach, pilot, sterowniki nożne, dźwignia CPR,

Technologie stosowane w produktach:



pSilver™

Wszystkie elementy z tworzywa ABS wykonano przy użyciu technologii **pSilver™**. Prefabrykat z nanocząsteczkami srebra, którego używamy w procesie formowania, zapewnia skuteczną ochronę bakteriostatyczną. Użycie technologii **pSilver™** w miejscach, których pacjent dotyka najczęściej, ogranicza rozmnażanie się groźnych bakterii, grzybów czy wirusów. **pSilver™** to także proces obróbki elementów tworzywowych, zapewniający gładką powierzchnię, której faktura utrudnia gromadzenie zanieczyszczeń.



fCharge™

Wszystkie ogniwa, które zasilają produkty Famed Żywiec wybierane są u sprawdzonego dostawcy, z którym współpracujemy od wielu lat. Każde ogniwo **fCharge™** przechodzi kontrolę w firmie zewnętrznej, następnie trafia na wielokrotne testy do kilku wydziałów technologicznych naszej fabryki. Wbudowana w produkty ładowarka z technologią szybkiego ładowania **fCharge™**, pozwala szybko dostarczyć ogniwom niezbędnej ilości prądu do przeprowadzenia regulacji. Wysoka liczba gwarantowanych cykli pracy, zapewnia bezpieczeństwo w przypadku utraty zasilania w szpitalu.





Famed FIONA (LM-01.5)	Famed FG-04	Famed FG-07	Famed m4000 (400570)	Famed FL-02
2170 mm	1750 mm	1745 mm	1330 mm	710 mm
1080 mm	745 mm	780 mm	550 mm (szerokość siedziska)	540 mm (szer. tapicerki)
580 - 940 mm	560 - 860 mm	660 - 1060 mm	550 - 900 mm	500 - 650 mm
70°	65°	70°	50°	90°
-	-	-	20°	-
12°	10°	18°	20°	-
5°	65°	14°	20°	-
170 kg	200 kg	175 kg	250 kg	160 kg
regulacja wysokości dźwignią nożną (pompa hydrauliczna), sprężyny gazowe do regulacji oparcia pleców oraz Trendelenburga i anty-Trendelenburga	sterowanie elektryczne za pomocą pilota przewodowego lub sterowników nożnych	elektryczna regulacja wysokości, manualna regulacja oparcia pleców oraz przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą	elektryczna regulacja wysokości, oparcia pleców, siedziska i podnóżków,	elektryczną regulacją wysokości oraz oparcia pleców





Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:

tel.: +48 33 866 62 00

Sprzedaż:

tel.: +48 33 866 63 75
sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Edycja 50/2026/10/11. Famed Żywiec zastrzega możliwość modyfikacji wyrobu i specyfikacji w ramach postępu technicznego. Wszystkie ilustracje i zdjęcia wykorzystane w tym materiale, są użyte tylko w celach pokazowych i mogą nie oddawać gotowego produktu. Osoby widoczne na zdjęciach nie są profesjonalistami wykonującymi zawody medyczne. To modelki. Sprzęt przedstawiony w katalogu przeznaczony jest do użytkowania w placówkach służby zdrowia przez uprawnione osoby po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.