



FAMED

Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

CATÁLOGO
DE PRODUCTO

www.famed.com.pl

Productos fabricados con materiales
con propiedades antibacterianas.



TABLA DE CONTENIDO

1. CAMAS DE PARTO

- FAMED FREYA

Una unión innovadora de una cama hospitalaria y cama de parto, completamente eléctrica.

- FAMED ROSSA

Cómoda, resistente y funcional cama de parto con mando eléctrico.

- FAMED FIONA

Económica y confortable cama de parto sin control eléctrico.

2. CUNAS NEONATALES

- FAMED OVO 2

Una cuna de bebé recién nacidos para mayor cercanía y seguridad.

3. SILLONES GINECOLÓGICO

- FAMED FG-04

Sillón ginecológico mando eléctrico.

- FAMED FG-07

Sillón ginecológico con ajuste eléctrico de altura.

4. SILLONES DE TRATAMIENTO

- FAMED FL-02

Sillón de tratamiento con ajuste eléctrico de altura.



Famed FREYA



Learn more!

UNA UNIÓN INNOVADORA DE UNA CAMA HOSPITALARIA Y CAMA DE PARTO, **COMPLETAMENTE ELÉCTRICA.**

Famed Freya es un producto único, que realiza simultáneamente la función de una cama hospitalaria (cumple con la norma PN-EN 60601-2-52) y cama de parto - una solución cómoda y económica. Esta versatilidad es posible gracias a sistemas de mando independientes (panel central, mando alámbrico, paneles de mando internos y externos), así como, una amplia gama de equipamiento complementario. La posición o configuración del producto se pueden modificar en pocos segundos. El lecho de la cama se apoya sobre una estable estructura de columnas. La cama tiene una batería incorporada que le permite mantener la funcionalidad completa (varios ciclos) en caso de emergencia.



VERSATILIDAD

Famed Freya se transforma rápidamente de una cama hospitalaria en una cama de parto, cumpliendo simultáneamente la norma PN-EN 60601-2-52, así mismo, cuenta con cómodas barandillas laterales plegables. La base de la cama ofrece espacio para colocar accesorios no utilizados, todos los cables y elemento de mando están cubiertos u ocultos, para facilitar la limpieza y desinfección. **Famed Freya** es una cama que cuenta con mando eléctrico integral.



SEGURIDAD

Famed Freya es una cama con estable estructura de columnas. Los componentes de plástico se han fabricado con tecnología **pSilver™**, utilizando materias primas de propiedades bacteriostáticas, los colchones se fabrican con tejidos antibacterianos, con costuras pegadas. Todos los accesorios se montan de forma segura y estable, ofreciendo un apoyo firme, durante el parto. La cama alcanza una posición muy baja, para facilitar el acceso y descenso de la misma.



PROXIMIDAD DE MADRE Y NIÑO

El uso de la cama de parto **Famed Freya** y la cuna de bebé **Famed OVO2** en una sala permite crear condiciones excepcionales a la madre y al bebé después del parto. La madre puede estar más cerca del recién nacido y puede cuidar fácilmente al bebé inmediatamente después del parto.





CARACTERÍSTICAS

Equipamiento:

- un kit completo de accesorios incluidos en el equipamiento estándar: soportes de rodillas de posición múltiple, apoyabrazos plegable, reposapiés,
- kit de colchones incluido en estándar,
- un lecho ancho ofrece un descanso cómodo a la madre y al niño,
- control eléctrico de las posiciones de altura, respaldo, asiento, Trendelenburg y anti-Trendelenburg,,
- extensión eléctrica y retracción de las secciones de pierna,
- condiciones muy cómodas antes, después y durante el parto.

Posiciones de parto:

- posición semi sentada (1),
- posición de cuclillas, con agarre (2),
- posición semi sentada,
- posición sentada (3),
- posición lateral (4),
- posición horizontal (5),
- posición posterior con polea (6),
- exploración ginecológica.



Longitud 2165 mm | Ancho total 965 mm | Altura mínima 595 mm | Altura máxima 975 mm | Ángulo de elevación de respaldo 70° | Ajuste de segmento de muslos 30° | Posición Trendelenburg 20° | Posición anti - Trendelenburg 20° | Carga máxima 250 kg

Famed ROSSA

CÓMODA, RESISTENTE Y FUNCIONAL

CAMA DE PARTO CON MANDO ELÉCTRICO

La cama de parto Famed ROSSA (LM-01.4) está destinada para pacientes de unidades ginecológicas y unidades de parto, en la etapa previa al parto, etapa del parto y puerperio. La cama de parto puede ser transformada fácilmente en sillón de parto, ofreciendo una posición cómoda durante el parto. Su estructura compacta es ideal para unidades y centros más pequeños. "Famed ROSSA ofrece un funcionamiento continuo y fiable gracias a la batería integrada, perfecta para situaciones de emergencia (varios ciclos)."



OPCIONES DE MANDO Y CONTROL

La cama se puede operar a través de paneles de control en los rieles laterales, que permiten ajustar la altura, el respaldo, encender y apagar la luz de fondo y activar la alarma. La funcionalidad adicional la proporciona un control remoto que, además de ajustar la altura, el ángulo de inclinación del segmento de la espalda y los muslos, también tiene posiciones preprogramadas para levantarse de la cama, así como una posición de examen y RCP. El control de pie opcional proporciona una operación de cama muy cómoda.



EQUIPAMIENTO COMPLETO

Una equipamiento muy completo permite adoptar diversas posiciones de parto, así como, permite realizar exploraciones especiales, en todas las etapas del parto - exploración ginecológica, táctil, rectoscopia. El equipamiento estándar incluye agarres de mando, estribos soporte de rodillas y bol de acero inoxidable. El equipamiento se puede montar sobre railes universales para accesorios. La cama cuenta con un kit completo de colchones impermeables que no permiten la penetración de líquidos en su interior.



SEGURIDAD

Los estables pasamanos están montados en el respaldo y pueden bajarse si es necesario. Las almohadillas de poliuretano de los asideros evitan el deslizamiento y proporcionan un apoyo seguro durante el parto. Todas las piezas de plástico y barnizadas están fabricadas con tecnología pSilver™ antibacteriana.



Longitud 2170 mm | Ancho total 1080 mm | Altura mínima 615 mm | Altura máxima 985 mm | Ángulo de elevación de respaldo 70°
Ajuste de segmento de muslos 17° | Posición Trendelenburg 12° | Posición anti - Trendelenburg 5° | Carga máxima 230 kg




Famed FIONA

ECONÓMICA Y CONFORTABLE

CAMA DE PARTO SIN CONTROL ELÉCTRICO

Una cama de parto, con excelente relación de calidad y precio. Una estructura sólida, estable, fácil de limpiar y desinfectar, así como, la falta de necesidad de conectarla a corriente eléctrica, garantizan una infalibilidad absoluta. Esta cama de parto con una construcción simple se puede transformar fácilmente en una silla de parto, ayudando al paciente y al personal médico en cada etapa del trabajo de parto. El control manual, las ruedas grandes, la mano de obra de alta calidad y la tecnología bacteriostática pSilver™ hacen que la cama de parto Famed FIONA (LM-01.5) sea adecuada para todas las condiciones.

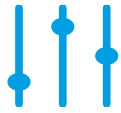

OPCIONES DE MANDO Y CONTROL

La altura del lecho se ajusta mediante bomba hidráulica con palanca de pie. Además, gracias a muelles de gas con bloque, es posible ajustar la inclinación Trendelenburg y anti-Trendelenburg y la inclinación de respaldo.



EQUIPAMIENTO COMPLETO

La cama de parto está equipada con un conjunto de dos colchones, colchoneta para neonato, agarre de manos, estribos, soportes de piernas y bol de acero inoxidable. Un raíl especial facilita el montaje y desmontaje de los accesorios. Una estructura estable y resistente, junto a la elevada calidad de materiales protectores utilizados y la tecnología pSilver™ garantizarán un uso prolongado y seguro para la madre y el niño.



CAMBIO RÁPIDO DE POSICIÓN

La cama Famed FIONA puede ser adaptada rápida y fácilmente en un lugar de parto. El desmontaje del colchón de la sección de piernas y el fácil desmontaje del tope de la cama, permiten cambiar la configuración y disponer de una cómoda posición de parto. Es una solución universal que sirve al paciente y al personal médico en cada etapa de parto.



Longitud 2170 mm | Ancho total 1080 mm | Altura mínima 580 mm | Altura máxima 940 mm | Ángulo de elevación de respaldo 70° | Posición Trendelenburg 12° | Posición anti - Trendelenburg 5° | Carga máxima 170 kg



Famed OVO 2

UNA CUNA DE BEBÉ

RECIÉN NACIDOS PARA MAYOR CERCANÍA Y SEGURIDAD.

Una cuna de bebé recién nacido Famed OVO 2 permite el contacto ininterrumpido entre la madre y el bebé desde los primeros momentos de la vida del bebé. La cuna hecha de plástico transparente con una base baja que permite entrar debajo de la cama hospitalaria muy cerca de la madre garantiza la proximidad. La altura ajustable proporciona un ajuste seguro de la cuna a la posición actual de la cama. El producto tiene la opción de colocar la cuna en la posición Trendelenburg / anti-Trendelenburg.



PROXIMIDAD ENTRE LA MADRE Y EL BEBÉ

Famed OVO 2 es una cuna para recién nacidos, que, gracias a su diseño, permite a la madre y al bebé la máxima cercanía desde el primer momento, así como proporciona una sensación de confort y seguridad. La base se coloca debajo de la cama, por lo que la cuna está muy cerca de la madre garantizando un contacto visual ininterrumpido desde los primeros momentos.



SEGURIDAD

El diseño simple y efectivo se combina perfectamente con la funcionalidad, la seguridad y la facilidad de limpieza (los mecanismos clave están ocultos en la estructura), así como la resistencia a los desinfectantes. Las ruedas con un diámetro de 75 mm permiten desplazarse suavemente por los pasillos del hospital; todas están dotadas de bloqueos individuales.



AJUSTE DE POSICIÓN

El cómodo ajuste de la altura por resorte de gas le permite ajustar la cuna a la configuración actual de la cama de parto / hospitalaria. Con un movimiento rápido de la mano, también puede inclinar la cuna en un ángulo de 12°. Asimismo, está disponible una versión con inclinación ajustada por resorte de gas.



Longitud 814 mm | Ancho total 476 mm | Altura mínima 925 mm | Altura máxima 1225 mm | Carga máxima 10 kg

Equipamiento:

- colchón blanco, resistente a los desinfectantes, impermeable
- estantería metálica de cesta para objetos personales, montada en la columna de la cuna.




Famed FG-04

SILLA GINECOLÓGICA

CONTROLADA ELÉCTRICAMENTE, CON MEMORIA DE FUNCIONES

El sillón con una base móvil, con bloqueo central de la rueda, facilita el movimiento eficiente de la silla en la sala de tratamiento, y los servomotores eléctricos incorporados permiten un cambio suave y el mantenimiento de la posición, sin ningún esfuerzo por parte del personal. Las posiciones predefinidas y la capacidad de guardar su propia configuración de funciones agilizan el trabajo con el paciente. La silla puede equiparse opcionalmente con una fuente de alimentación de batería, lo que le permite realizar varios ciclos de movimientos en situaciones de emergencia.

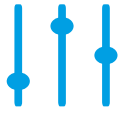

MANDO

Las funciones de silla requeridas se pueden obtener por medio de servomotores eléctricos integrados controlados por un control remoto o control de pie (opcional). Con un solo botón, puede colocar la silla en la posición Trendelenburg, posición de entrada / salida y programar la posición seleccionada. Los ajustes eléctricos incluyen: cambiar la altura de la silla, ajustar el ángulo del asiento y el respaldo.



COMODIDAD

La posición del sillón, operada con un solo botón en el control remoto, permite una posición muy baja del borde frontal del asiento, lo que facilita que el paciente se siente y se levante. La silla tiene la opción de programar la posición seleccionada y activarla con un solo botón en el control remoto. Además, la tapicería sin costuras y los materiales resistentes a los desinfectantes con tecnología pSilver™ ayudarán a mantener limpia la silla.



EQUIPAMIENTO COMPLETO

La silla está equipada con un tazón ginecológico de acero inoxidable, un rollo de papel colocado en el asa en la bandeja debajo del respaldo y los rieles laterales en el asiento y el respaldo para colocar accesorios adicionales. La silla puede equiparse con un segmento de las piernas (extraíble), apoya rodillas, reposapiés, control de pies y tazón urológico. El tamaño estándar de los rieles de accesorios permite el uso de otros accesorios o mangos especializados típicos.



Longitud 1750 mm | Ancho total 745 mm | Altura mínima 560 mm | Altura máxima 860 mm | Ángulo de elevación de respaldo 65°
Posición Trendelenburg 10° | Posición anti - Trendelenburg 65° | Carga máxima 200 kg



Famed FG-07



SILLÓN GINECOLÓGICO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA

Un sillón controlado eléctricamente mediante actuadores asistidos con muelle de gas con bloqueo. El equipamiento complementario incluye el ajuste eléctrico de altura, mediante controlador de pie - permite ahorrar tiempo y facilita el trabajo del personal sanitario.



CAMBIO DE POSICIÓN

Gracias a los resortes de gas, es posible cambiar la posición de la silla según sea necesario, y la altura de la silla es eléctricamente ajustable. Gracias a los resortes de gas con bloqueo, puede ajustar suavemente la inclinación del respaldo, así como las inclinaciones Trendelenburg y anti-Trendelenburg, con la ayuda de las cuales también ajustamos la posición del asiento.



CALIDAD DE MATERIALES

La tapicería sin costuras y la forma de mamparos facilitan la limpieza del sillón. Los materiales utilizados resultan completamente resistentes a los medios desinfectantes. Además, existe la posibilidad de elegir el color del tapizado, escogiendo entre una amplia gama de colores.



EQUIPAMIENTO COMPLETO

En su versión estándar, el sillón está equipado con bol ginecológico de acero inoxidable, rodillo de papel sobre soporte bajo respaldo, listones para montar equipos extra en asiento y respaldo. Además, el equipamiento puede completarse con apoyos de rodillas, apoyabrazos, reposapiés, así como, un bol urológico.



Longitud 1745 mm | Ancho total 780 mm | Altura mínima 660 mm | Altura máxima 1060 mm | Ángulo de elevación de respaldo 70°
Posición Trendelenburg 18° | Posición anti - Trendelenburg 14° | Carga máxima 175 kg



Famed FL-02



SILLÓN DE TRATAMIENTO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA

Sillón de tratamiento oftalmológico y laringológico, con ajuste eléctrico de altura y respaldo y posibilidad de giro de hasta 90°.



MANDO ELÉCTRICO

Las funciones controladas eléctricamente permiten ahorrar tiempo y reducen el esfuerzo del personal médico. El ajuste se realiza mediante un cómodo controlador de pie.



POSIBILIDADES

El sillón permite girar el asiento en 90°, respecto a la base, facilitando el acceso a los aparatos diagnósticos. Además, el reposacabezas cuenta con ajuste en diferentes ejes, los reposabrazos pueden ser inclinados o desmontados, facilitando el acceso al paciente. Todo ello mejora notablemente la ergonomía de trabajo.



CALIDAD

La tapicería sin costura garantiza un uso prolongado y comodidad de paciente. La estructura del sillón está fabricada de acero pintado con pintura en polvo. Los mamparos de la base, respaldo y asiento se han fabricado con plástico ABS que, gracias a la tecnología pSilver™, facilita los cuidados higiénicos y limpieza en el gabinete.



Longitud 710 mm | Ancho de tapicería 540 mm | Altura mínima 500 mm | Altura máxima 650 mm | Ángulo de elevación de respaldo 90°
Carga máxima 160 kg





	Famed FREYA (LM-03)	Famed ROSSA (LM-01.4)	Famed FIONA (LM-01.5)
Longitud	2165 mm	2170 mm	2170 mm
Anchura total	965 mm	1080 mm	1080 mm
Ajuste de altura	595 - 975 mm	615 - 985 mm	580 - 940 mm
Ángulo de elevación del respaldo	70°	70°	70°
Ángulo de elevación del asiento	30°	17°	-
Posición de Trendelenburg	20°	12°	12°
Posición de anti - Trendelenburg	20°	5°	5°
Carga máxima	250 kg	230 kg	170 kg
Mando	mando alámbrico, panel central, paneles de mando exteriores e interiores y controles de pie (opcional)	paneles en barandillas, panel central, controlador de pie, palanca CPR	ajuste de altura con una palanca de pie con una bomba hidráulica, resortes de gas para ajustar el respaldo, Trendelenburg y anti-Trendelenburg

Tecnologías utilizadas en los productos:



pSilver™

Todos los elementos de plástico y ABS fueron fabricados con tecnología **pSilver™**. Los prefabricados enriquecidos con nanopartículas de plata, utilizados en el proceso de producción de elementos plásticos, garantizan una eficaz protección bacteriostática. El uso de la tecnología **pSilver™** en aquellos lugares, más expuestos al contacto con la paciente, limita el crecimiento de peligrosas bacterias, hongos o virus. La tecnología **pSilver™** abarca también el procesamiento de los elementos de plástico, garantizando una superficie lisa, que dificulta la acumulación de suciedad.



fCharge™

Todas las baterías utilizadas en productos Famed Zywiec proceden de un proveedor probado, que lleva largos años cooperando con nosotros. Cada batería **fCharge™** pasa por un exhaustivo control, realizado en empresa externa. Seguidamente, pasa por numerosos ensayos en diferentes departamentos tecnológicos de nuestra planta. Nuestros productos integran un cargador de baterías, con tecnología de carga rápida **fCharge™**, que permite suministrar la cantidad adecuada de energía a las baterías, para realizar ajustar el lecho. Un elevado número de ciclos completos de trabajo, garantizan la máxima seguridad, en caso de un fallo de suministro en hospital.





Famed OVO 2	Famed FG-04	Famed FG-07	Famed FL-02
814 mm	1750 mm	1745 mm	710 mm
476 mm	745 mm	780 mm	(El ancho del colchón) 540 mm
925 - 1225 mm	560 - 860 mm	660 - 1060 mm	500 - 650 mm
-	65°	70°	90°
-	-	-	-
-	10°	18°	-
12°	65°	14°	-
10 kg	200 kg	175 kg	160 kg
ajuste de altura y anti-Trendelenburg mediante pistones a gas con bloqueo	control eléctrico por medio de control remoto con cable o de control de pie	Ajuste eléctrico de altura, ajuste de respaldo, ajuste de inclinación Trendelenburg y anti-Trendelenburg con resortes de gas con bloqueo	ajuste eléctrico de altura y respaldo





POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

camas de parto y sillones ginecológicos

Tapicería antibacteriana, clase de incombustibilidad CRIB 5



Negro
H1 (Ab1)



Fucsia
H4 (Ab4)



Celadon
H6 (Ab6)



Naranja
H8 (Ab8)

Tapicería antibacteriana, sin ftalato



Amarillo
1F



Azul claro
2F



Azul
3F



Turquesa
4F



Gris claro
5F



Gris
6F



Rojo
8F



Negro
7F

Patrones de pegatinas decorativas para la cama de parto Famed FREYA



Patrón básica- Flor de Magnolia



Sailor blue



Aquamarine



Classic blue



Alabaster



Famed blue



Sunny yellow



Turquoise



Fuchsia rosse





Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polonia

Oficina :
tel.: +48 33 866 62 00

Venta:
tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Edición 101/2026/01/9. Famed Żywiec se reserva el derecho de modificar el producto y las especificaciones como resultado del progreso técnico. Todas las ilustraciones y fotos utilizadas en este material se utilizan solo para fines de demostración y pueden no reflejar el producto terminado. Las personas en las fotos no son profesionales médicos. Son modelos. El equipo presentado en el catálogo está destinado a ser utilizado en centros de atención médica por personas autorizadas después de leer previamente el manual de uso.