



# FAMED

Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

# ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО

КАТАЛОГ  
ПРОДУКТОВ

[www.famed.com.pl](http://www.famed.com.pl)

Продукты выполнены из материалов с  
антибактериальными свойствами.



# СОДЕРЖАНИЕ

## 1. РОДОВЫЕ КРОВАТИ

- FAMED FREYA

Инновационное, полностью электрическое сочетание

- FAMED ROSSA

Удобная, прочная и функциональная родовая кровать

- FAMED FIONA

Экономичная и удобная родовая кровать без электр

## 2. КРОВАТКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

- FAMED OVO 2

Кроватка для новорожденных, обеспечивающая бли

## 3. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

- FAMED FG-04

Гинекологическое кресло с электрическим управлен


- FAMED FG-07

Гинекологическое кресло с электрической регулиро

## 4. МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ КРЕСЛА

- FAMED FL-02

Манипуляционное кресло с электрической регули



ие больничной и родовой кровати.

ть с электрическим управлением.

ического управления.

зость и безопасность.

нием.

вкой высоты.

ней высоты.

# Famed FREYA



Learn more!

## ИННОВАЦИОННОЕ, ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ БОЛЬНИЧНОЙ И РОДОВОЙ КРОВАТИ

Famed Freya это уникальный продукт, который одновременно выполняет функцию больничной (соответствие норме PN-EN 60601-2-52) и родовой кровати – удобное и экономичное решение. Эта универсальность возможна благодаря независимым системам управления (центральная панель, проводной пульт управления, внешние и внутренние панели управления), а также широкой гамме дополнительного оборудования. Изменение положения или конфигурации продукта возможно за несколько секунд, а само ложе опирается на стабильной стоечной конструкции. Кровать имеет встроенный аккумулятор, позволяющий поддерживать полную работоспособность (несколько циклов) в аварийной ситуации.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Famed Freya может быстро превратиться с больничной кровати в кровать для родов, одновременно соответствует норме PN-EN 60601-2-52, а также оснащена удобным, опускаемым боковым поручнем. В основании кровати есть места для хранения неиспользуемых аксессуаров, а все провода и элементы управления ограждены или спрятаны для облегчения уборки и дезинфекции. Famed Freya – это полностью электрически управляемая кровать.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Famed Freya – это кровать со стабильной, стоечной конструкцией. Пластиковые части выполнены из материалов с антимикробными свойствами при помощи технологии pSilver™, матрасы – из антибактериальных тканей с клеенными швами. Все аксессуары надежно и прочно крепятся, гарантируя безопасную поддержку во время родовой деятельности. Кровать имеет очень низкую минимальную высоту, при которой легче взбираться на кровать и вставать с нее.



### БЛИЗОСТЬ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Использование в одном зале и родовой кровати Famed Freya, и кроватки для новорожденных Famed OVO, позволяет создать прекрасные условия для матери и ребенка после родов. Мать может не только изменять положение кровати, но и прикладывать к себе младенца или положить его обратно в Famed OVO безопасным образом.

1





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Оборудование:

- Стандартный комплект аксессуаров: многопозиционные опоры для колен, складные рукоятки, опоры для ступней
- Стандартный комплект матрасов - в том числе матрас для новорожденного,
- Широкое ложе, которое обеспечивает комфортный отдых матери с младенцем,
- электрическая регулировка высоты, спинной секции, сиденья, положений Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга,
- электрическое удлинение и отвод ножных секций,
- Очень комфортные условия перед, после и во время родов.

### Родовые позы:

- Полусидячая поза (1),
- Поза на корточках с использованием рукоятки(2),
- Полусидячая поза
- Сидячая поза (3),
- Боковая поза (4),
- Горизонтальная поза (5),
- Поза на спине с вытяжением (6)
- Гинекологическое обследование.



Длина 2165 мм | Общая ширина 965 мм | Минимальная высота 595 мм | Максимальная высота 975 мм | Угол подъема опоры спины 70°  
Регулировка бедренной секции 30° | Положение Тренделенбурга 20° | Положение анти-Тренделенбурга 20° | Максимальная нагрузка 250 кг | 5

# Famed ROSSA

## УДОБНАЯ, ПРОЧНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОДОВАЯ КРОВАТЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Родовая кровать Famed LM-01.4 предназначена для пациенток акушерско-гинекологических отделений как в предродовом, так и в родовом и послеродовом периоде. Родовую кровать можно легко трансформировать в кресло, обеспечивающее роженице удобное положение во время родов. Компактная конструкция доказала свою эффективность также в малых медучреждениях. Famed LM-01.4 обеспечивает непрерывную, надежную работу благодаря встроенному аккумулятору. Famed LM-01.4 обеспечивает непрерывную надежную работу благодаря встроенному аккумулятору, который идеально подходит для аварийных ситуаций (несколько циклов).



### ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Кроватью можно управлять с панелей в боковых ограждениях, которые позволяют регулировать высоту, спинную секцию, включать и выключать подсветку и активировать аларм. Дополнительный функционал обеспечивается пультом дистанционного управления, который, помимо регулировки высоты, угла наклона спины и сегмента бедра, также имеет запрограммированное положение для вставания с кровати, а также экзаменационное и CPR положение. Простое управление также обеспечивается ножным управлением.



### БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Богатое оснащение позволяет принимать различные родовые позы, а также дает возможность проводить специализированные перинатальные обследования - ректоскопические, гинекологические или пальпационные. В основном оснащении находятся рукоятки, опоры ступней, подколенные опоры и лоток из нержавеющей стали. Оснащение можно закрепить на универсальных шинах для принадлежностей. Кровать оснащена комплектом матрасов, защищенным от просачивания жидкости внутрь.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Устойчивые поручни крепятся к спинке и при необходимости могут быть опущены. Полиуретановые накладки на ручках предотвращают скольжение и обеспечивают надежную поддержку во время родов. Все пластиковые и лакированные детали изготовлены по антибактериальной технологии pSilver™.



Длина 2170 мм | Общая ширина 1080 мм | Минимальная высота 615 мм | Максимальная высота 985 мм | Угол подъема опоры спины 70°  
Регулировка бедренной секции 17° | Положение Тренделенбурга 12° | Положение анти-Тренделенбурга 5° | Максимальная нагрузка 230 кг



# Famed FIONA

ЭКОНОМИЧНАЯ И УДОБНАЯ

РОДОВАЯ КРОВАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Родовая кровать с отличным соотношением качество/цена. Прочная и стабильная конструкция, которую легко очистить и дезинфицировать, а также отсутствие необходимости подключения к питанию, гарантируют стопроцентную надежность. Эта простая кровать для родов может легко превратиться в родильное кресло, обслуживая пациентку и медицинский персонал на каждом этапе родов. Ручное управление, большие колеса, высокое качество изготовления и бактериостатическая технология pSilver™ делают родильную кровать Famed LM.01.5 подходящей для любых условий.



## ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка высоты ложа осуществляется через гидравлическую помпу при помощи ножного рычага. Дополнительно, благодаря газовым пружинам с блокировкой можно регулировать наклон Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, а также наклон опоры спины.



## БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Родовая кровать оснащена комплектом из двух матрасов, матрасом для новорожденного, ручьями, опорами для ног, подколенными опорами и лотком из нержавеющей стали. Монтаж и демонтаж дополнительных принадлежностей облегчает специальная шина. Конструкция стабильная и прочная, а высокое качество использованных защитных материалов и технология pSilver™ гарантируют многолетнюю, бесперебойную эксплуатацию и безопасность для матери и младенца.



## БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗЫ

Кровать Famed LM-01.5 LIGHT можно быстро трансформировать в место для принятия родов. Снятие матраса с ножной секции и простой демонтаж изголовья позволяют изменять конфигурацию и выбирать удобную родовую позу. Это универсальное решение, которое служит пациенту и медицинскому персоналу на каждом этапе родов.



Длина 2170 мм | Общая ширина 1080 мм | Минимальная высота 580 мм | Максимальная высота 940 мм | Угол подъема опоры спины 70° | Положение Тренделенбурга 12° | Положение анти-Тренделенбурга 5° | Максимальная нагрузка 170 кг



# Famed OVO 2



## КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЛИЗОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Кроватка для новорожденных Famed OVO 2 обеспечивает непрерывный контакт между матерью и ребенком с первых мгновений жизни новороodka. Близость обеспечивается манежем из прозрачного материала и низким основанием, позволяющим подъезд под больничную койку очень близко к матери. Регулировка высоты обеспечивает безопасную регулировку кроватки в соответствии с текущим положением ложа. Детская кроватка имеет функцию установки манежа в положение Тренделенбурга / Анти-Тренделенбурга



### БЛИЗОСТЬ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Famed OVO 2 - это кроватка для новорожденных, которая благодаря своему дизайну позволяет матери и ребенку максимально сблизиться с первых минут жизни ребенка, а также дает ощущение комфорта и безопасности. Основание движется под кроватью, поэтому манеж находится очень близко к матери, обеспечивая непрерывный зрительный контакт с первых минут.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Простой и эффективный дизайн прекрасно сочетается с функциональностью, безопасностью и простотой очистки (ключевые механизмы скрыты в конструкции) а также устойчивостью к дезинфицирующим средствам. Колеса диаметром 75 мм позволяют аккуратно пересечь больничные коридоры, в каждом из них имеется индивидуальный блокирующий механизм



### РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ

Удобная, вспомогательная газовая пружина, регуляция высоты позволяет настроить кроватку в соответствии с текущими настройками больничной или кровати для родов. Быстрым движением руки вы также можете наклонить манеж под углом 12°. Также доступна версия с наклоном регулируемым газовой пружинной.



Длина 814 мм | Общая ширина 476 мм | Минимальная высота 925 мм | Максимальная высота 1225 мм | Максимальная нагрузка 10 кг



### Оснащение:


- белый матрас, устойчивый к дезинфицирующим средствам, водонепроницаемый,
- металлическая корзина для личных вещей, закрепленная на ножке кроватки.



# Famed FG-04

## ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПАМЯТЬЮ

Кресло на мобильном основании с центральной блокировкой шасси способствует эффективному перемещению кресла по кабинету, а встроенные электрические серводвигатели обеспечивают плавное изменение положения и поддержание положения без каких-либо усилий со стороны персонала. Предопределенные позиции и возможность сохранения собственных настроек ускоряет работу с пациентом. Кресло имеет опциональное питание от аккумуляторов, что позволяет выполнять несколько циклов движений в аварийных ситуациях.

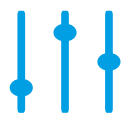

### УПРАВЛЕНИЕ

Требуемые функции кресла можно получить с помощью встроенных электроприводов, управляемых с помощью пульта дистанционного управления или ножного управления (опция). Нажатием кнопки вы можете установить кресло в положение Тренделенбурга, положение которое облегчает встать/сесть и запрограммировать выбранное положение. Электрические регулировки включают в себя: изменение высоты кресла, регулировка угла наклона сиденья и спинки.



### УДОБСТВО

Положение кресла, управляемое одной кнопкой на пульте дистанционного управления, позволяет получить очень низкое положение переднего края сиденья, что значительно облегчает возможность пациентки сесть на него и опустить его. Кресло имеет возможность запрограммировать выбранное положение и активировать его одной кнопкой на пульте дистанционного управления. Кроме того, бесшовная обивка и устойчивые к дезинфицирующим средствам материалы по технологии pSilver™ помогут поддерживать кресло в чистоте.



### БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Кресло оснащено гинекологической чашей из нержавеющей стали, рулоном бумажной подложки, помещенным на ручку в лотке под спинкой, а также рейки для крепления оборудования на сиденье и спинке. Он может быть оснащен сегментом голени (съёмным), подколениками, подставками для ног, педалью управления и урологической чашей. Стандартные рейки для аксессуаров позволяют использовать другие типичные специализированные принадлежности или ручки.



Длина 1750 мм | Общая ширина 745 мм | Минимальная высота 560 мм | Максимальная высота 860 мм | Угол подъема опоры спины 65°  
Положение Тренделенбурга 10° | Положение анти-Тренделенбурга 65° | Максимальная нагрузка 200 кг



# Famed FG-07



## ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Кресло управляется механическим способом с использованием приводов, поддерживаемых газовой пружиной с блокировкой. Дополнительно оснащен электрической регулировкой высоты при помощи ножного переключателя, что позволяет сэкономить время и облегчает работу персоналу.



### ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Благодаря газовым пружинам можно менять положение кресла по мере необходимости, а высота кресла регулируется электрически. Благодаря газовым пружинам с блокировкой можно плавно регулировать наклон спинки, а также наклоны Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, с помощью которых мы также регулируем положение сиденья.



### КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

Бесшовная обивка и формы ограждений облегчают поддержку чистоты кресла. Использованные материалы стопроцентно устойчивы к воздействию дезинфекционных средств. Дополнительно есть возможность персонализации кресла путем выбора цвета из широкой колористической палитры.



### БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Кресло в своей базовой версии оснащено гинекологическим лотком из нержавеющей стали, держателем для бумаги за опорой спины, а также планкой для крепления оборудования к сиденью и опоре спины. Дополнительно можно оснастить его подколennыми опорами, опорами для рук, подножками, а также урологическим лотком и колесной системой.



Длина 1745 мм | Общая ширина 780 мм | Минимальная высота 660 мм | Максимальная высота 1060 мм | Угол подъема опоры спины 70°  
Положение Тренделенбурга 18° | Положение анти-Тренделенбурга 14° | Максимальная нагрузка 175 кг



# Famed FL-02



## МАНИПУЛЯЦИОННОЕ КРЕСЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ ВЫСОТЫ

Офтальмологическое и ларингологическое кресло с электрической регулировкой высоты и опоры спины, а также возможностью поворота даже на 90°.



### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электрически доступные функции позволяют сэкономить время и облегчают работу персонала в кабинете. Регулировки осуществляются при помощи удобного в использовании ножного переключателя.



### ВОЗМОЖНОСТИ

Кресло имеет возможность поворота на 90° по отношению к основанию, что облегчает доступ к диагностической аппаратуре. Кроме того, на эргономию работы положительно влияет многопланово регулируемый подголовник, а также отклоняемые или съемные опоры для рук, которые обеспечивают удобный доступ к пациентке.



### КАЧЕСТВО

Бесшовная обивка гарантирует многолетнее использование и удобство пациента. Конструкция кресла выполнена из стали, покрытой порошковым лаком, а защитные барьеры основания, опоры спины и сидения – из пластика ABS, который благодаря технологии pSilver™ облегчает гигиенический уход в кабинете.



Длина 710 мм | Ширина обивки 540 мм | Минимальная высота 500 мм | Максимальная высота 650 мм | Угол подъема опоры спины 90°  
Максимальная нагрузка 160 кг





	Famed FREYA (LM-03)	Famed ROSSA (LM-01.4)	Famed FIONA (LM-01.5)
Длина	2165 мм	2170 мм	2170 мм
Общая ширина	965 мм	1080 мм	1080 мм
Регуляция высоты	595 - 975 мм	615 - 985 мм	580 - 940 мм
Угол подъема опоры спины	70°	70°	70°
Угол подъема сидения	30°	17°	-
Положение Тренделенбурга	20°	12°	12°
Положение анти-Тренделенбурга	20°	5°	5°
Максимальная нагрузка	250 кг	230 кг	170 кг
Управление	Мониторинговое устройство, проводной пульт управления, центральная панель, внешние и внутренние панели управления а также ножное управление (опционально)	Панели в поручнях, центральная панель, ножной переключатель, рычаг CPR-функции.	Регулировка высоты гидравлическим ножным рычагом, газовые пружины для регулировки спинки, Тренделенбург" и "анти-Тренделенбург

## Технологии, используемые в изделиях:



### pSilver™

Все элементы с пластика ABS произведено с использованием технологии pSilver™. Полуфабрикат с наночастицами серебра, который мы используем в процессе формования, обеспечивает эффективную бактериостатическую защиту. Использование технологии pSilver™ в местах, к которым пациент прикасается чаще всего, ограничивает размножение опасных бактерий, грибка или вирусов. pSilver™ - это также процесс обработки пластиковых элементов, обеспечивающий гладкую поверхность, структура которой препятствует скоплению загрязнений.



### fCharge™

Все элементы питания изделий Famed Żywiec берутся у проверенного поставщика, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Каждая батарея fCharge™ проходит проверку во внешней фирме, потом поддается многочисленным тестам в нескольких технологических отделах нашей фабрики. Встроенное в изделия зарядное устройство с технологией быстрого заряжения fCharge™ позволяет быстро обеспечить необходимое количество питания для осуществления регулировки. Высокое число гарантированных рабочих циклов обеспечивает безопасность в случае перерыва питания в больнице.





Famed OVO 2	Famed FG-04	Famed FG-07	Famed FL-02
814 мм	1750 мм	1745 мм	710 мм
476 мм	745 мм	780 мм	540 мм
925 - 1225 мм	560 - 860 мм	660 - 1060 мм	500 - 650 мм
-	65°	70°	90°
-	-	-	-
-	10°	18°	-
12°	65°	14°	-
10 кг	200 кг	175 кг	160 кг
Регулировка высоты и анти-Тренделенбурга при помощи газовых пружин с блокировкой	электрическое управление с пульта или ножного управления	электрическая регулировка высоты, регулировка спинки, регулировка наклона Тренделенбург и анти-Тренделенбург при помощи газовых пружин с блокировкой	Электрическая регулировка высоты и опоры





## ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

КРОВАТЕЙ ДЛЯ РОДОВ А ТАКЖЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ

### Антибактериальная обивка, класс невоспламенения CRIB 5



Черный  
H1 (Ab1)



Вересковый  
H4 (Ab4)



Салатовый  
H6 (Ab6)



Оранжевый  
H8 (Ab8)

### Антибактериальная обивка без фталатов



Желтый  
1F



Светло-голубой  
2F



Синий  
3F



Бирюзовый  
4F



Светло-серый  
5F



Серый  
6F



Красный  
8F



Черный  
7F

### Шаблоны вклеек для кровати для родов Famed FREYA



Стандартная расцветка – Magnolia Flower



Sailor blue



Aquamarine



Classic blue



Alabaster



Famed blue



Sunny yellow



Turquoise



Fuchsia rosse



**Famed Żywiec Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 1  
34-300 Żywiec, Poland

**Офис :**

tel.: +48 33 866 62 00

**Продажа :**

tel.: +48 33 866 63 75  
export@famed.com.pl  
www.famed.com.pl



Редакция 96/2026/01/10. Famed Żywiec оставляет за собой право вносить изменения в продукт и спецификацию в рамках технического прогресса. Все иллюстрации и фотографии, используемые в этом материале, предназначены только для иллюстративных целей и могут не отражать готовый продукт. Люди, изображенные на фотографиях, не являются медицинскими работниками. Они модели. Представленное в каталоге оборудование предназначено для использования в медицинских учреждениях уполномоченными лицами после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.