



FAMED

Żywiec



**БОЛЬНИЧНЫЕ КРОВАТИ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ**


**КАТАЛОГ
ПРОДУКТОВ**





СОДЕРЖАНИЕ

1. Больничные кровати
2. Тележки для пациентов

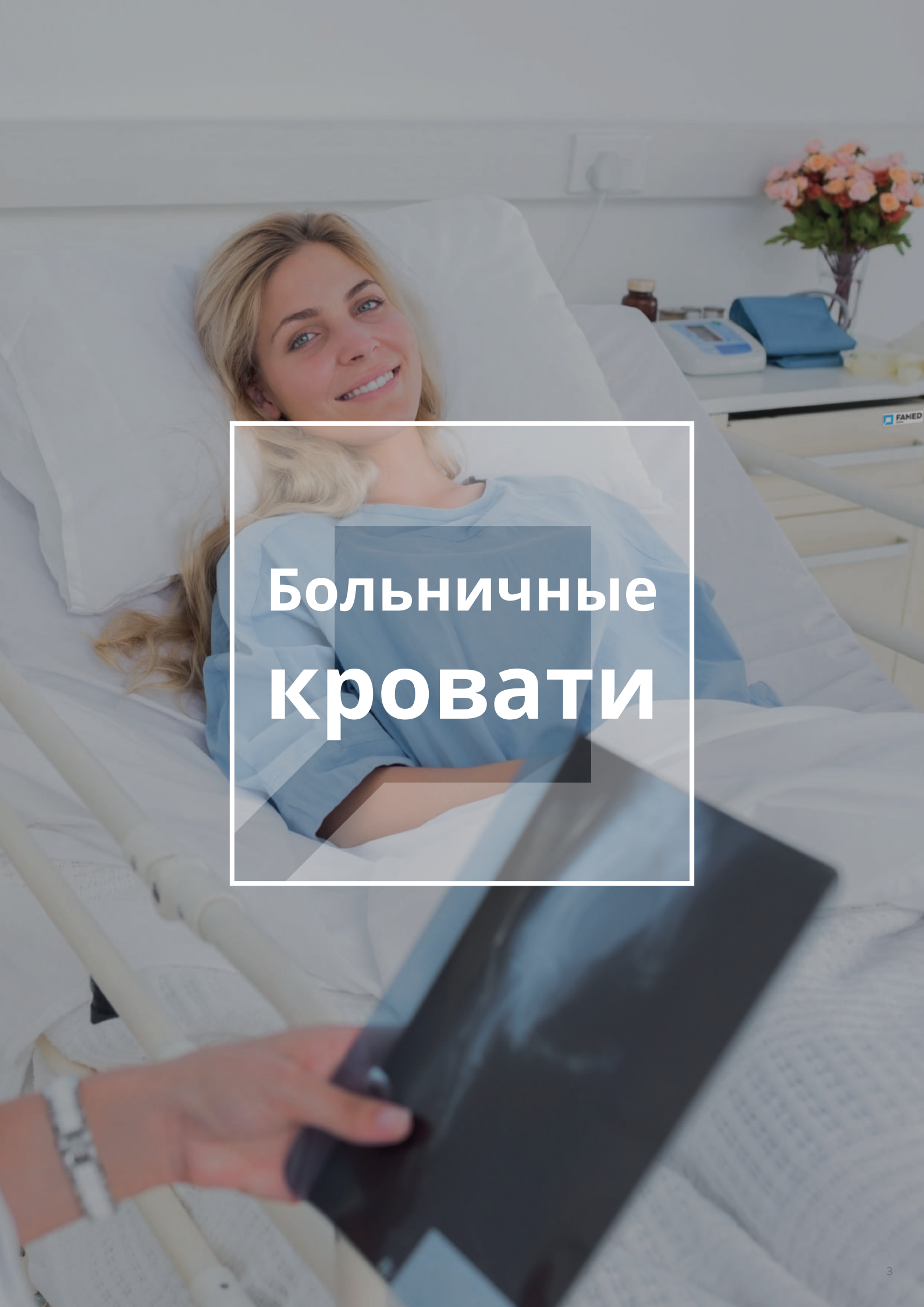A photograph of a young woman with blonde hair lying in a hospital bed, smiling at the camera. She is wearing a light blue hospital gown. The bed has white linens and a white pillow. In the background, there is a bedside table with a vase of pink and orange flowers, a blue folder, and some medical equipment. A hand holding a tablet is visible in the foreground. A semi-transparent white box with a thin black border contains the text.

Больничные кровати

Famed LE-13



ИННОВАЦИОННАЯ, СТОЕЧНАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ICU С НАКЛОНАМИ

Famed LE-13 это кровать для отделений интенсивной терапии (ОИОМ), конструкция которой опирается на трех стабильных цилиндрических стойках. Кровать оснащено дополнительными терапевтическими функциями, а также комплексом сенсоров, влияющих на повышение безопасности и эффективность осуществляемой медицинской помощи. Она прочная, изготовлена с использованием пластика и лаков с антибактериальными свойствами (pSilver™), а также оснащена легкоочищаемыми прозрачными секциями, пропускающими рентгеновские лучи.



ПОЗИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Famed LE-13 предлагает боковые наклоны для позиционной терапии – они облегчают уход за пациентом и исключают неудобство для медицинского персонала (например поднятие более тяжелых пациентов, нагрузки на позвоночник). Стабильная стоечная конструкция и продвинутые системы управления обеспечивают высокий уровень безопасности и функциональности. На центральной панели сигнализируется положение секции спины (в углах); при ее наклоне на 30 градусов движение замедляется, позволяя оставить ложе в подходящем положении (терапевтическое требование для разных заболеваний, например пульмонологических).



ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Решения, используемые в Famed LE-13, облегчают каждодневную работу с пациентом: пятое колесо, интегрированная и сертифицированная система взвешивания, легкие для дезинфекции конструктивные элементы, быстро демонтируемые концы, индикаторы ложа или направляющее колесо. Мытье кровати тоже облегчит использование в Famed LE-13 ограждений из пластика ABS и лаки в антибактериальной технологии pSilver™. Эксплуатация кровати возможна через центральную панель (с сенсором концентрации света для лучшей видимости), проводной пульт управления, панели в боковых поручнях и ножные переключатели (опция).



БЕЗОПАСНОСТЬ

За безопасность пациента отвечают надежные приводные узлы и комплексы узлов, низкое положение ложа и максимальная нагрузка до 250 кг. Встроенная в кровать сертифицированная система взвешивания позволит легко выбрать соответствующую дозу лекарства, в то время как аккумулятор fCharge™ даст возможность обслуживания пациента во время транспортировки или в случае пропадания электроснабжения. Такие функции как система вызова и подсветка в основании кровати влияют на комфорт и ощущение безопасности пациента. Кровать оснащена сенсорами, позволяющими осуществлять боковые наклоны, когда боковые ограждения опущены.


1





РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

- Положение Тренделенбурга (5).
- Положение анти-Тренделенбурга (2),
- Положение Фаулера (1),
- Положение кардиологического кресла (4),
- Боковой наклон (6),
- Электрический CPR (положение «ноль») (3),
- Автоконтур,
- Положение для обследования.

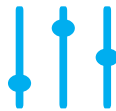

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Селективная и центральная блокировка электрических функций с уровня центральной панели,
- Возможность удлинения ложа,
- Двойная функция авторегрессии,
- Центральная блокировка колес, пятое колесо и направляющее колесо,
- Сертифицированная система взвешивания,
- Ложе HPL, пропускающее рентгеновские лучи,
- Покрытия проводов и механизмов, облегчающие очищение,
- Опоры спины CPR и ножной секции,
- Крючки для пакетов для сбора физиологических жидкостей,
- Опциональные туннели для кассет РГ,
- Опциональный ножной переключатель.



Famed NANO



БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С БОГАТЫМИ ОПЦИЯМИ КОНФИГУРАЦИИ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ

Famed NANO – это полностью конфигурируемая электрическая кровать, которую, благодаря широкому предложению аксессуаров и возможности выбора многочисленных разнообразных опций дооснащения, можно подстроить под свои потребности. Кровать прочная, изготовлена с использованием лаков с антибактериальными свойствами (pSilver™). Стоечная конструкция позволяет беспрепятственно наблюдать за пациентом в ходе госпитализации. Продвинутые функции позволяют использовать кровать в отделениях интенсивной терапии.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кровать NANO мы разработали так, чтобы высокая функциональность сочеталась с легкостью уборки и дезинфекции. Стоечная конструкция дает высокий уровень безопасности, возможность интеграции с устройствами визуализации, а также высокую максимальную нагрузку. Пациент имеет в своем распоряжении лампочку, которая освещает пол вокруг кровати, и кнопку системы вызова. На центральной панели персонал больницы может установить терапевтическую позицию нажатием одной кнопки.



КОНФИГУРАЦИИ

Кровать Famed NANO оснащена широким рядом элементов, которые можно конфигурировать. Благодаря этому каждый может подстроить их под свои потребности. В кровати Famed NANO доступны такие элементы, как система измерения веса, удлинение ложа, туннели для кассет РГ, полка для постели, планка для оборудования, панели для пациента и другие элементы дополнительного управления.



БЕЗОПАСНОСТЬ

За безопасность пациента отвечают надежные приводные узлы и узлы управления, низкое положение ложа и двойной механизм авторегрессии. Безопасно опускаемые боковые поручни выполнены в антибактериальной технологии pSilver™, кроме того, они имеют минимальное и постоянное расстояние между подвижными элементами. Благодаря этому исключен риск травмирования ладони. Стабильность кровати обеспечивают высокого качества колесики и центральная блокировка. Аккумуляторы в технологии fCharge™ дают возможность обслуживать пациента во время транспортировки или в случае перерывов в электроснабжении.

1





ДОСТУПНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение Тренделенбурга (2),
- Положение анти-Тренделенбурга (5),
- Положение Фаулера (4),
- Положение кардиологического кресла (3),
- Электрический CPR (положение «ноль»),
- Автоконтур,
- Положение для обследования.

СВОЙСТВА

- Блокировки отдельных функций с уровня центральной панели,
- Богатый выбор возможностей изменения и конфигурирования кровати,
- Возможность удлинения ложа,
- Двойная функция авторегрессии,
- Центральная блокировка колес, пятое колесо (опционально) и направляющее колесо,
- Опциональная система взвешивания,
- Ложе HPL, пропускающее рентгеновские лучи,
- Опциональные туннели для кассет РГ,
- Электрическая функция CPR,
- Крючки для пакетов для сбора физиологических жидкостей,
- Опциональный ножной переключатель



Длина 2280 мм | Общая ширина 965 мм | Минимальная высота 390 мм | Максимальная высота 770 мм | Угол подъема опоры спины 70°
 Регулировка бедренной секции 40° | Положение Тренделенбурга 15° | Положение анти-Тренделенбурга 15° | Максимальная нагрузка 250 kg

Famed NEXO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, КОМФОРТНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ

Экономичная, электрическая кровать с системой ранней мобилизации изготовлена с мыслью о комфорте и безопасности пациента а также обслуживающего персонала. Famed NEXO отлично подойдет для больничных палат, отделений долговременной терапии, отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Новая версия популярной в целом Мира больничной кровати поражает своей простой и высокопрочной конструкцией в сочетании с расширенными функциями и высококачественным материалом.



КОМФОРТ

Famed NEXO предлагает широкий диапазон доступных позиций благодаря возможности управления его функциями при помощи центральной панели, проводного пульта управления или панелей управления, в боковых ограждениях. Позиции доступные при нажатии одной кнопки, простые в обслуживании боковые ограждения с системой SoftDropPlus™ а также индикаторы угла наклона – это гарантия комфорта для обслуживающего персонала. Кровать Famed NEXO можно очень быстро опустить в минимально низкую позицию благодаря которой можно наиболее безопасно подняться с и ложиться на кровать, а риск получения травмы минимален. В более быстром восстановлении помогает специальная панель предназначенная для ранней мобилизации пациента а также вертикальный режим.



ЭКОНОМИЯ

Famed NEXO это самая универсальная больничная кровать в предложении Famed Żywiec, которое можно использовать для госпитализации высоких пациентов (возможность удлинения ложа кровати) или людей с избыточным весом. Продуманная конструкция и бактериостатическая защита, которая обеспечивается благодаря технологии pSilver™ значительно сокращает время дезинфекции и уменьшает количество инфекций в больнице. Легендарное качество изготовления и легкость обслуживания для сервисной службы позволяет устранить неисправность на месте, без использования нестандартных приспособления, что значительно ускоряет ремонт, снижает затраты и предотвращает простой



БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы спроектировали экономичную больничную кровать с самыми высокими стандартами безопасности. Famed NEXO обеспечивает высокую максимальную нагрузку (250кг), надежность и безопасность подтвержденные результатами испытаний, проведенных внешними компаниями и отзывами клиентов из почти 100 стран мира. Технология pSilver™ используемая в пластиковых и лакированных элементах гарантирует бактериостатическую защиту на каждом этапе использования. Боковые ограждения расположены по всей длине кровати гарантируют пациенту превосходную защиту а постоянное безопасное расстояние между ними, предотвращает защемление пальцев или рук. Центральная блокировка колес обеспечивает устойчивое положение кровати в помещении. Быстрый демонтаж торцов позволяет на использование их как дополнительная опора CPR под пациентом в случаи реанимации.





ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Технология **pSilver™** - все пластиковые и лакированные элементы изготовлены с использованием специальной смеси с наночастицами серебра, которые обеспечивают эффективную бактериостатическую защиту. Это один из лучших способов поддержки профилактики предотвращения больничных инфекций;
- Система и панель для ранней мобилизации пациентов;
- Безопасные боковые ограждения **SoftDropPlus™** - постоянное безопасное расстояние между ними для предотвращения случайного защемления пальцев и рук - в соответствии со стандартом (EN 60601-2-52), управляемая одной рукой;
- Панели управления, спроектированы для максимального упрощения обслуживания для слепых и слабовидящих;
- Позиции активируемые одной кнопкой: анти-шоковая, позиция для осмотра, Фаулер, CPR и кардиологическое кресло;
- Возможность заблокировать некоторые функции пульта ДУ или боковых панелей при помощи центральной панели;
- Система, которая фиксирует торцы в каркасе кровати для большей устойчивости и Долговечности а также для безопасной вертикализации пациента;
- Легко снимаемый торец может служить для дополнительной поддержки пациент во время реанимации;
- Конструкция кровати разработана таким образом, чтобы максимально снизить затраты на обслуживание и время ремонта;
- Ложе из HPL материала, прозрачное для рентгеновских лучей (МАЕ 0,39 мм Al);
- Небольшое расстояние ложа кровати от пола (всего 390 мм);
- Сигнализация разблокированных колес, когда кровать подключена к электросети (опция);
- Сигнализация выхода пациента с трехступенчатой регулировкой чувствительности (опция);
- Возможность удлинения ложа кровати.

ТРИ ФАЗА РАННЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА

Не только для ОРИТ

Ранняя мобилизация пациента - важный элемент любой современной больницы. Famed NEXO помогает пациенту вставать с постели и выполнять физические упражнения при помощи специальной панели управления для вертикальной мобилизации, высокие параметры продольных наклонов, устойчивых торцов с возможностью фиксирования. Famed NEXO может помочь пациенту встать и отойти от кровати, побуждая его вернуться в форму и выздороветь.

#1

На первом этапе пациент может использовать внутреннюю панель управления на боковом ограждении, чтобы поднять спинку до комфортного уровня. В случае пациентов в отделениях интенсивной терапии, этот процесс должен выполняться обслуживающим персоналом, используя положение 30 ° или выше, чтобы предотвратить респираторную пневмонию.

#2

На втором этапе - с помощью медицинского персонала - можно использовать положение кардиологического кресла. Таким образом, пациент сможет проверить, позволит ли его состояние встать с постели в третьей фазе. Установка кровати в положение анти-Тренделенбурга позволит пациенту проверить способность вставать. Используя торец для опоры стоп, мы можем выполнять некоторые базовые упражнения, а физиотерапевт может начать программу восстановления мышц.

#3

На третьем этапе, с помощью персонала и установки кровати в положение анти-Тренделенбурга (лучший угол 18,5 ° на рынке), пациент может попытаться встать. Если больной достаточно силен, чтобы попытаться встать на ноги, воспользуйтесь специальной панелью управления, расположенной снаружи за боковыми ограждениями. Анатомическая опора для рук в боковом ограждении оснащена кнопками вверх / вниз, позволяющими поднять пациента до уровня, на котором он сможет встать самостоятельно.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Длина 2180 мм | Общая ширина 985 мм | Минимальная высота 390 мм | Максимальная высота 800 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Регулировка бедренной секции 40° | Положение Тренделенбурга 16,5° | Положение анти-Тренделенбурга 18,5° | Максимальная нагрузка 250 kg

Famed LP-02.1



ПРОЧНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КРОВАТЬ

Кровать Famed LP-02.1 предназначена для оснащения больниц, санаториев и реабилитационных учреждений, которые ищут надежного и простого решения. Их можно использовать во время диагностирования, наблюдения и лечения болезней. Кровать оснащена ложем, выполненным из лакированной стали.




КАЧЕСТВО

Покупка кровати Famed LP-02.1 - это выбор известного качества продуктов с фабрики в г. Живец. Это простая кровать, покупка которой удовлетворит потребности Вашего медицинского учреждения и обеспечит непрерывность его функционирования. Ты можешь быть уверен в изделии, которое покупаешь. О каждой фазе производства заботится лаборатория, а конечный продукт дважды проходит контроль качества. Кровать изготавливается полностью на нашей фабрике, и мы контролируем каждый этап ее производства.



МАТРАСЫ

Мы можем оснастить кровать Famed LP-02.1 пенным матрасом с паропроницаемым водоотталкивающим чехлом или другой, более инновационной моделью - например, пассивный противопролежневый матрас. Матрасы могут быть обшиты чехлом в одном из 13 доступных цветов.

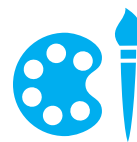

ВАРИАНТЫ КОНЦОВ

Кровать Famed LP-02.1 доступна с тремя вариантами концов: пластиковые концы, из хромированной стали с ламинированной плиткой или из лакированной стали. Боковые поручни предлагаются в двух версиях: из стали - лакированные и хромированные. Цвет и шаблон вставок тоже могут быть подстроены к требованиям клиента в соответствии с доступным образцом.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:


- Матрас с дополнительными свойствами (например пассивный противопролежневый матрас),
- Рукоятка,
- Подвеска для капельницы,
- Рама для вытяжения,
- Центральная блокировка колес или

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прочная, проверенная конструкция,
- Лак и пластиковые элементы с антибактериальной добавкой в технологии **pSilver™**,
- Безопасный, складной поручень, регулируемая опора спины.



Длина 2190 мм | Общая ширина 965 мм | Минимальная высота 500 мм | Максимальная высота 500 мм | Угол подъема опоры спины 70° | Максимальная нагрузка 170 кг

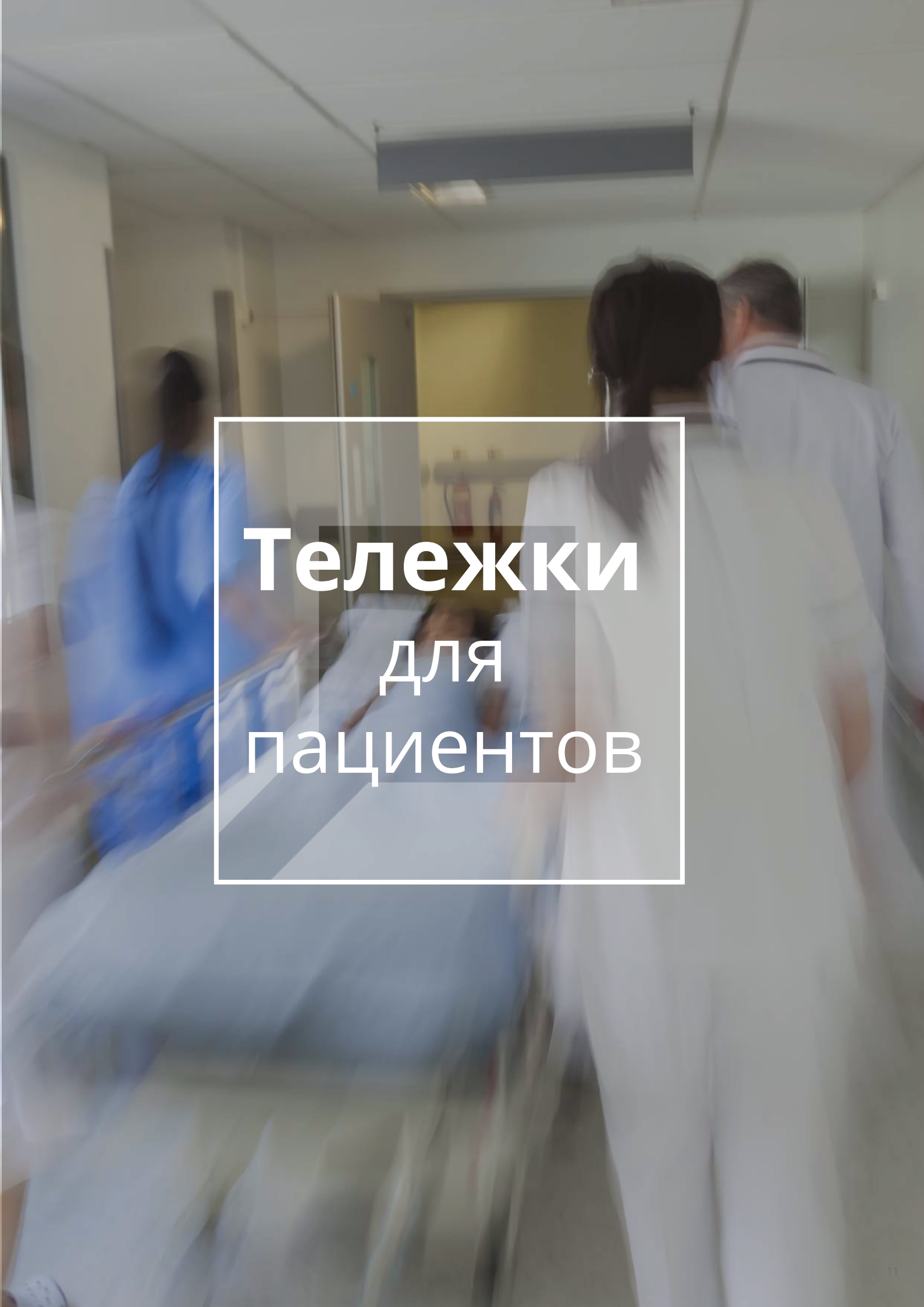

Тележки для пациентов

Famed SPARK

ЭРГОНОМИЧНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ

Famed SPARK – это принципиально новая конструкция, проверенная в десятках стран: экономичная, функциональная и прочная тележка для транспортировки пациентов. Антибактериальные свойства синтетических материалов и лакированных элементов сочетаются с низкими затратами на обслуживание и непревзойдённой долговечностью.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Боковые поручни защищают пациента на протяжении более 1500 мм и не имеют острых краёв и опасных мест, в которых могут застрять пальцы. Большая максимально допустимая нагрузка (SWL) 250 кг позволяет безопасно транспортировать самых тяжёлых пациентов вместе с необходимым оборудованием. Антибактериальная технология с содержанием серебра pSilver™ в лаке, пластиковых элементах и наматраснике облегчает дезинфекцию и препятствует развитию бактерий. Большие колёса обеспечивают устойчивость и облегчают транспортировку.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Тележка совместима с мобильными рентгеновскими аппаратами и позволяет монтаж опциональных туннелей для рентгеновских кассет. Рычаги регулировки высоты, доступные с обеих сторон тележки, позволяют наблюдать за пациентом в процессе изменения высоты. Опционально доступен матрас с защитными ремнями и ручками для переноски пациента с одного медицинского изделия на другое. На выбор имеются простые в использовании двухсегментные (WP-02.0) и трёхсегментные (WP-02.1) ложа для лёгкого позиционирования. Вместительная корзина для вещей пациента, расположенная в основании тележки, позволяет поддерживать порядок.



ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отсутствие щели между кроватью и тележкой при перекладывании пациента позволяет минимизировать усилия медицинского персонала и риск падения. Поручни опускаются ниже ложа, что облегчает безопасное соскальзывание с матраса при вставании и защищает поручни от повреждений. Две пары ручек для ведения тележки и ручка на сегменте спины позволяют удобно маневрировать тележкой по коридорам больницы. Направляющее колесо и опциональное пятое колесо облегчают транспортировку пациента и качение тележки в тесных коридорах.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- штатив для капельницы,
- пятое колесо,
- штатив для полотенца,
- держатель для кислородного баллона,
- туннели для рентгеновских кассет,
- полка для монитора,
- матрас для переноски пациента,
- защитный ремень для пациента,
- два дополнительных рычага блокировки.

СВОЙСТВА:


- регулировка высоты гидравлическим сервомотором,
- сегмент спины регулируется газовыми пружинами,
- наклон тренделенбурга и анти-тренделенбурга регулируется газовыми пружинами,
- к двум рычагам блокировки колёс имеется лёгкий доступ с трёх сторон тележки,
- поручень SafeDrop™ длиной 1500 мм,
- отсутствие щели с кроватью при перекладывании пациента.



Famed WP-09

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА С БОГАТЫМ ВЫБОРОМ ОПЦИЙ

Famed WP-09 это тележка со стоечной конструкцией для транспортировки пациентов между залами в больницах и клиниках. Стабильная конструкция позволяет использовать ее в качестве простого манипуляционного стола. Она оснащена прозрачными плитами HPL, пропускающими.

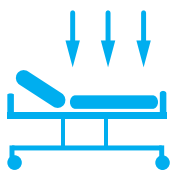

ВОЗМОЖНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Famed WP-09 – это тележка со стоечной конструкцией для транспортировки пациентов между залами в больницах и клиниках. Стабильная конструкция позволяет использовать ее в качестве простого манипуляционного стола. Она оснащена прозрачными плитами HPL, пропускающими рентгеновские лучи, прочная структура которых улучшает эффективность реанимационных действий. Тележку можно оснастить 2- или 4-секционным ложем и ограждениями из стали: лакированными или хромированными.




ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тележка оснащена четырьмя колесами с центральной блокировкой, с одним колесом для движения прямо – идеально для тесных коридоров и частого изменения места эксплуатации. Большой диаметр колес облегчает преодоление препятствий и неровностей. Дооснащение тележки Famed WP-09 опциональным пятым колесом также делает его использование более эффективным.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Тележка Famed WP-09 производится в Польше. Все производство находится в фабрике в г.Живец, обеспечивая нам постоянную возможность контролировать качество наших изделий. Компоненты самого высокого качества защитят Ваше приобретение от износа и обеспечат многолетнюю, бесперебойную работу.

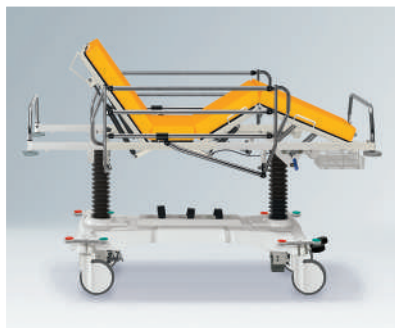

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Боковые поручни, покрытые хромом,
- Ремни для поддержки пациента,
- 4-секционное ложе,
- Пятое колесо,
- Подвеска для капельницы,
- Нестандартные, более высокие матрасы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Регулировка высоты гидравлическими приводами (ножной рычаг),
- Опора спины, регулируемая газовыми пружинами,
- Положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, достигаемое путем гидравлического привода,
- Регулировка бедренной секции (газовая пружина),
- Регулировка секции для голени (в 4-секционном ложе, храповой механизм)
- Центральная блокировка колес, доступная с каждой стороны,
- Молниеносное складание поручней с сохранением безопасного пространства,
- Туннель для кассеты РГ.



Длина 2100 мм | Общая ширина 800 мм | Минимальная высота 560 мм | Максимальная высота 890 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Регулировка бедренной секции 30° | Положение Тренделенбурга 15° | Положение анти-Тренделенбурга 15° | Максимальная нагрузка 250 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Famed NANO	Famed NEXO	Famed LE-13
Длина	2280 мм	2180 (+325) мм	2280 мм
Общая ширина	965 мм	985 мм	990 мм
Регулировка высоты	390 - 770 мм	390 - 800 мм	485 - 885 мм
Угол подъема опоры спины	70°	70°	70°
Регулировка бедренной секции	40°	40°	43°
Боковой наклон	-	-	25°
Положение Тренделенбурга	15°	16,5°	15°
Положение анти-Тренделенбурга	15°	18,5°	13°
Диаметр колес	150 мм	150 мм	150 мм
Максимальная нагрузка	250 kg	250 кг	250 кг
Опции управления	Проводной пульт управления, центральная панель, панели в поручнях, ножной переключатель	Проводной пульт управления, центральная панель, панели в поручнях, ножной переключатель	Проводной пульт управления, центральная панель, панели в поручнях, ножной переключатель, ножной переключатель

Технологии, используемые в изделиях:



pSilver™

Все элементы с пластика ABS произведено с использованием технологии **pSilver™**. Полуфабрикат с наночастицами серебра, который мы используем в процессе формования, обеспечивает эффективную бактериостатическую защиту. Использование технологии **pSilver™** в местах, к которым пациентка дотрагивается чаще всего, ограничивает размножение опасных бактерий, грибов или вирусов. **pSilver™** - это также процесс обработки пластиковых элементов, обеспечивающий гладкую поверхность, структура которой препятствует скоплению загрязнений.



fCharge™

Все источники питания изделий Famed Żywies выбираются у проверенного поставщика, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Каждая батарея **fCharge™** проходит проверку во внешней фирме, потом подвергается многочисленным тестам в нескольких технологических отделах нашей фабрики. Встроенное в изделия зарядное устройство с технологией быстрого заряжения **fCharge™** позволяет быстро обеспечить необходимое количество питания для осуществления регулировки. Высокое число гарантированных рабочих циклов обеспечивает безопасность в случае перерыва питания в больнице.



SoftDropPlus™

Система SoftDropPlus™ - это безопасность и комфорт при работе с больничной кроватью от Famed Żywies. Благодаря использованию газовых пружин с механизмом замедления, боковые ограждения опускаются в нижнее положение управляемым образом. В результате движение получается плавным, бесшумным и безопасным для пациента. При помощи одной руки можно с легкостью опустить боковые ограждения вниз. Выбор решения SoftDropPlus™ позволяет сэкономить место по бокам кровати, поскольку ограждения складываются максимально близко к раме кровати. Контурные ручки в боковых ограждениях максимально облегчают вставание из положения лежа, а также вставание с кровати. Специально предназначенная клавиатура управления для пациента с выступами на клавишах, значительно облегчают использование слепым и слабовидящим пациентам. Специальная система ранней мобилизации позволяет быстрее вернуться в форму пациенту.

Famed LP-02.1	Famed WP-02 SPARK	Famed WP-09
2190 мм	2040 мм	2100 мм
965 мм	790 мм	800 мм
500 мм	600 - 900 мм	560 - 890 мм
70°	70°	70°
-	(Ножная секция) - 35°	30°
-	-	-
-	23°	15°
-	12°	15°
125 мм	200 мм	200 мм
170 кг	250 кг	250 кг
-	-	-



SafeDrop™

Боковые поручни **SafeDrop™** опускаются ниже ложа по всей своей длине, не создавая препятствий для пациента при спуске с тележки. Тщательно продуманная конструкция практически полностью исключает пространство, возникающее после приближения тележки к больничной койке или операционному столу. Барьеры **SafeDrop™** идеально взаимодействуют с поручнями наших кроватей. Всё это обеспечивает большую безопасность пациентов и требует меньших физических усилий от персонала. Поручни **SafeDrop™** можно опускать и поднимать одной рукой. Обтекаемая форма и отсутствие острых краёв обеспечивают безопасность и предотвращают порезы и случайные прижатия пальцев.

Функция авторегрессии

Механизм регулировки опоры спины и голени оснащен системой обратного движения, отводящего пункт поддержки поясничного сегмента и позволяющего установить удобное расстояние между сидением и сегментом, поддерживающим голени. Эта функция определяется как двойная авторегрессия и служит для уменьшения чрезмерного давления в зоне поясничного сегмента и голени в сидячем положении. Чрезмерное давление на ткани ведет к повреждению капилляров, и в конечном итоге вызывает повреждение этих тканей и появления ран и язв, является одной из причин пролежней. Уменьшение давления - это профилактическое действие в противпролежневой терапии и терапии, поддерживающей быстрое выздоровление пациента.



Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Польша

Офис:

Тел.: +48 33 866 62 00
Факс: +48 33 475 58 90

Продажа:

Тел.: +48 33 866 63 75
Факс: +48 33 475 58 90

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Редакция 95/2021/10/5. Компания Famed Żywiec оставляет за собой право модификации изделия и спецификации в связи с техническим прогрессом. Все иллюстрации и фотографии в этом материале используются только в демонстрационных целях и могут не отображать готовое изделие. Люди на фото – не профессиональные врачи, а модели. Оборудование, представленное в каталоге, предназначено для использования в медицинских учреждениях уполномоченными лицами после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.

