




FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

OPERAČNÍ STOLY

KATALOG
PRODUKTŮ

www.famed.com.pl

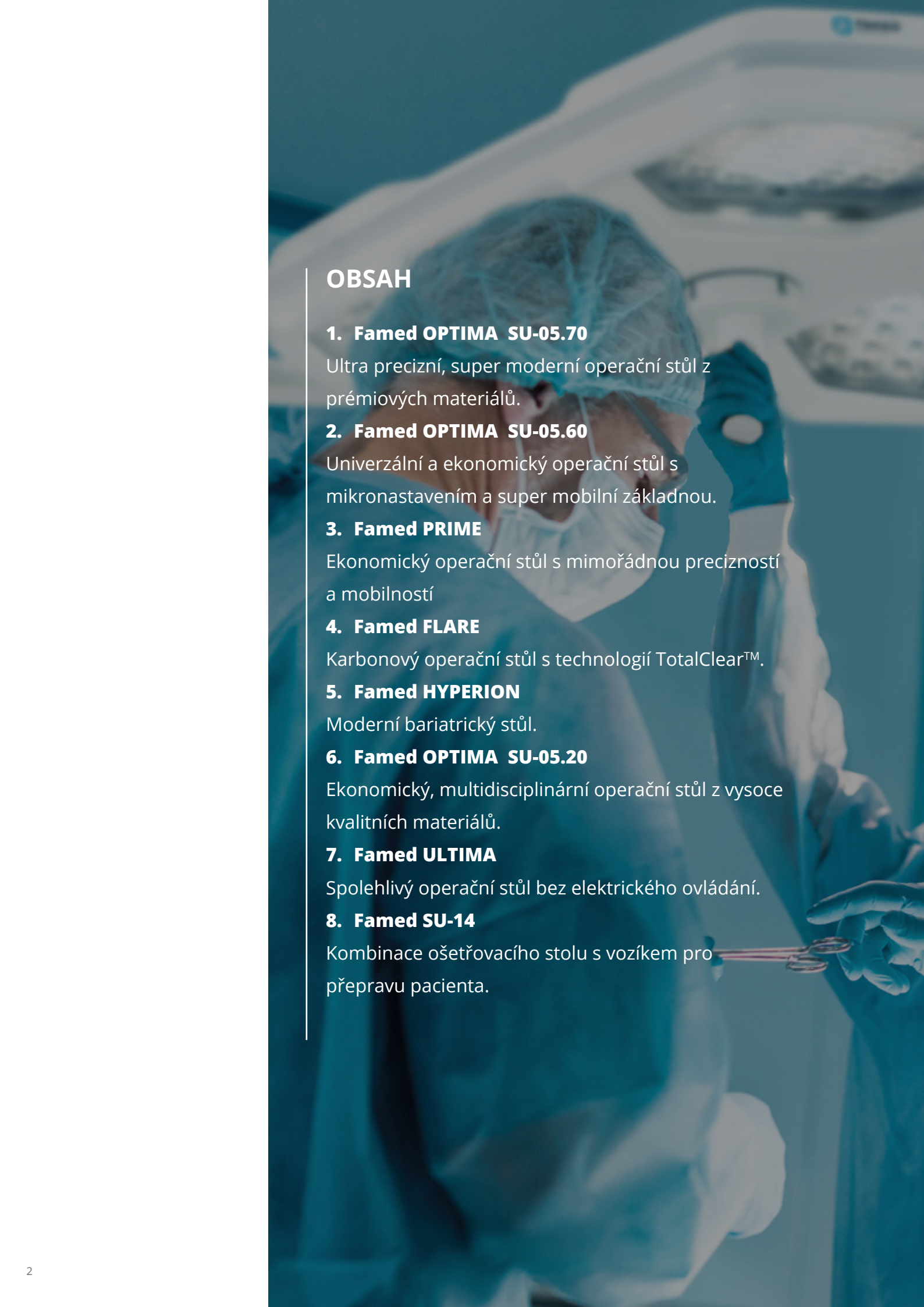

OBSAH

1. Famed OPTIMA SU-05.70

Ultra precizní, super moderní operační stůl z prémiových materiálů.

2. Famed OPTIMA SU-05.60

Univerzální a ekonomický operační stůl s mikronastavením a super mobilní základnou.

3. Famed PRIME

Ekonomický operační stůl s mimořádnou precizností a mobilností

4. Famed FLARE

Karbonový operační stůl s technologií TotalClear™.

5. Famed HYPERION

Moderní bariatrický stůl.

6. Famed OPTIMA SU-05.20

Ekonomický, multidisciplinární operační stůl z vysoce kvalitních materiálů.

7. Famed ULTIMA

Spolehlivý operační stůl bez elektrického ovládání.

8. Famed SU-14

Kombinace ošetřovacího stolu s vozíkem pro přepravu pacienta.

A photograph of two surgeons in an operating room, wearing blue scrubs, masks, and headlamps. The image has a teal color overlay. A white rectangular frame is centered over the text.

OPERAČNÍ STOLY



X-line™

xMotionPro™



xMobility360™



NOVÁ GENERACE OPERAČNÍCH STOLŮ



Famed X Line™

X-Line™

X-Line™ je nová generace operačních stolů vyvinutá v reakci na reálné potřeby moderních operačních bloků: rostoucí počet zařízení na sále, omezený prostor a čím dál větší nároky týkající se důkladného a opakovatelného polohování pacienta. V chirurgii hraje roli každý milimetr – proto jsme vytvořili nástroj, který s chirurgickou přesností dovoluje řídit pozici pacienta na operačním stole a zároveň usnadňuje organizaci stanoviště obklopeného přístroji.



X-Line™ podpírají dva pilíře:

01

ultra přesné polohování a super mobilní konstrukce. Nastavení desky s přesností až 0,5 mm a 0,1° dovoluje precizně uzpůsobit uložení pacienta nárokům mnoha lékařských zákroků, včetně zákroků s využitím robotiky a intraoperativního zobrazování.


02

360° mobilita umožňuje plynule manévrovat se stolem a přesně ho nastavit dokonce i v omezeném prostoru, kde ho obklopuje mnoho různých zařízení.



Objevte Famed X-Line™:

Famed OPTIMA 5.70
Famed OPTIMA 5.60
Famed PRIME

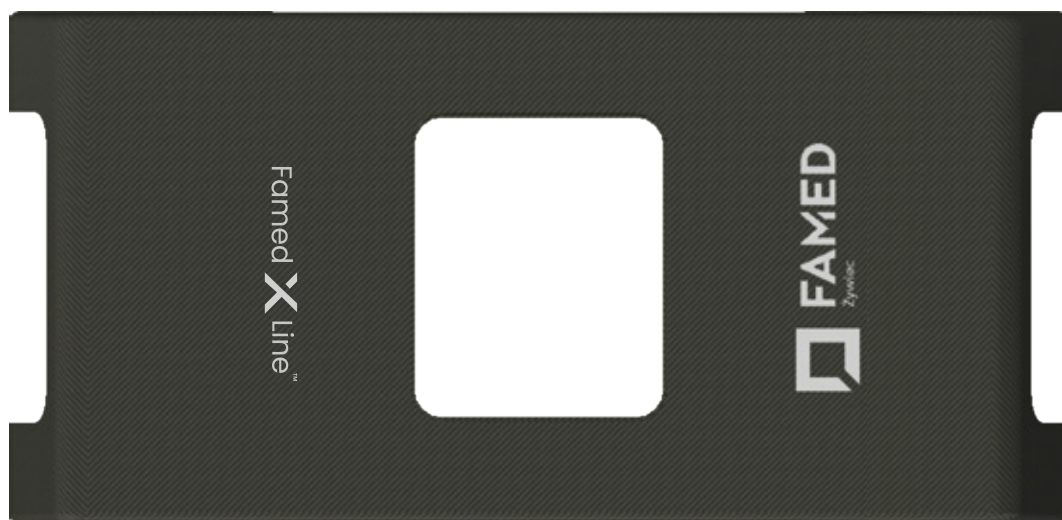

V praxi přináší X-Line™ týmu větší kontrolu nad polohováním pacienta, efektivnější uspořádání operačního sálu a vyšší komfort a ergonomii práce.



Famed OPTIMA (5.70)



Learn more!

ULTRA PRECIZNÍ, SUPER MODERNÍ OPERAČNÍ STŮL Z PRÉMIOVÝCH MATERIÁLŮ

Operační stůl s ultra přesným systémem řízení xMotionPro™ a nastavením rychlosti pohybů desky. Super mobilní základna xMobility360™ usnadňuje manévrování a nastavování stolu na operačním sále. Díky modulární konstrukci lze segmenty desky rychle vyměňovat a použití vysoce kvalitní nerezové oceli a uhlíkového vlákna zajišťuje dlouhou životnost a zefektivňuje dezinfekci. Široké spektrum speciálního příslušenství v kombinaci s nadprůměrnou přesností zajišťují všestranné využití stolu při mnoha lékařských zákrocích.



UNIVERZÁLNÍ A KONFIGUROVATELNÝ

- Modulární konstrukce a široký výběr příslušenství usnadňují přizpůsobení stolu většině zákroků.
- Veškeré pohyby stolu (s výjimkou nastavení opěrky hlavy) se ovládají na dálkovém ovladači.
- Konstrukce desky sestávající ze zádové sekce, bederní opěrky a sedací sekce s možností montáže různých variant opěrek nohou a podhlavníků.
- Vodovzdorné, antistatické matrace mFix™ z polyuretanové pěny s tloušťkou 80 mm.
- Lišty na příslušenství s ochranou před vypadáváním příslušenství.
- Sloupky a základna z uhlíkového vlákna nebo nerezové oceli vyrobené technologií IntelProtectPlus™ (dle vlastního výběru).
- RTG průhledná deska z uhlíkového vlákna nebo HPL (dle vlastního výběru).
- Zobrazovací okno o délce 1440 mm (standard).



VYSOKÁ PŘESNOST OVLÁDÁNÍ

- Tři různé provozní režimy umožňují přizpůsobit rychlost pohybů stolu potřebám chirurga.
- Systém ovládání xMotionPro™ umožňuje měnit polohu desky stolu s přesností až 0,5 mm a 0,1°.
- Okamžitá reakce stolu na stisknutí a uvolnění tlačítka na ovladačích zajišťuje precizní polohování.
- Kabelový ovladač s displejem jako součást standardního vybavení; volitelně: boční ovládací panel montovaný na sloup stolu a alternativní pohon.
- Dotykový LCD displej na ovladači umožňuje snadné čtení parametrů nastavení desky, úroveň nabití baterií, potenciální kolize nebo chyby.
- Možnost uložení 8 nepoužívanějších poloh.



SUPER MOBILNÍ KONSTRUKCE

- Nízká základna xMobility360™ (150 mm) bez vystupujících součástí a konstrukce z uhlíkového vlákna zajišťující bezpečný přístup pro C-rameno.
- Čtyři kola otočná o 360° a volitelné páté kolo umožňují plynulé manévrování stolem dopředu, dozadu a do stran a otáčení kolem vlastní osy.
- Kola se nacházejí pod krytem základny, což omezuje hromadění se nečistot a usnadňuje úklid.
- Aretace kol ovládaná dálkovým ovladačem – čtyři široce rozkročené podpěry skryté v základně zajišťují stabilitu a bezpečnost.
- Profilované otvory na chodidla na každé straně základny umožňují chirurgovi přistoupit blíže ke stolu, čímž zajišťují pohodlný přístup k operačnímu poli.



Délka 2100 mm | Celková šířka 600 mm | Minimální výška 680 mm | Maximální výška 1080 mm | Poloha Trendelenburg 40° | Poloha Anti-Trendelenburg 40° | Boční náklon 30° | Podélný posun 400 mm | Maximální zatížení 460 kg

Famed OPTIMA (5.60)



Learn more!

UNIVERZÁLNÍ A EKONOMICKÝ OPERAČNÍ STŮL S MIKRONASTAVENÍM A SUPER MOBILNÍ ZÁKLADNOU

Univerzální operační stůl kombinující širokou škálu poloh, vysoké maximální zatížení a velmi dobré parametry RTG průhlednosti a podélného posuvu desky. Ultra přesné ovládání xMotionPro™ s přesností až 0,5 mm a 0,1° zefektivňuje polohování a super mobilní základna xMobility360™ usnadňuje manévrování se stolem na operačním sále. Ocelové prvky z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 vyrobené technologií IntelliProtectPlus™ usnadňují dezinfekci a omezují usazování se nečistot. Široké spektrum příslušenství umožňuje používat stůl při výkonu mnoha lékařských zákroků.



UNIVERZÁLNÍ A KONFIGUROVATELNÝ.

- Modulární konstrukce a široký výběr příslušenství usnadňují přizpůsobení stolu většině zákroků.
- RTG průhledná deska z plastu HPL.
- Vodovzdorné, antistatické matrace mFix™ z polyuretanové pěny s tloušťkou 80 mm.
- Boční lišty s ochranou před vypadáváním příslušenství.
- Možnost prohození opěrky hlavy s podnožkami a změny charakteristiky stolu.
- Veškeré pohyby stolu (s výjimkou nastavení opěrky hlavy a podnožek) se ovládají na dálkovém ovladači.
- K dispozici jsou dvě varianty konstrukce desky s možností montáže různých variant opěrek nohou a podhlavníků.




MIKRONASTAVENÍ

- Tři různé provozní režimy umožňují přizpůsobit rychlost pohybů stolu potřebám chirurga.
- Systém ovládání xMotionPro™ umožňuje měnit polohu desky stolu s přesností až 0,5 mm a 0,1°.
- Okamžitá reakce stolu na stisknutí a uvolnění tlačítka na ovladačích zajišťuje precizní polohování.
- Kabelový ovladač s displejem jako součást standardního vybavení; volitelně: boční ovládací panel montovaný na sloup stolu a alternativní pohon.
- Dotykový LCD displej na ovladači umožňuje snadné čtení parametrů nastavení desky, úrovně nabití baterií, potenciální kolize nebo chyby.
- Možnost uložení 8 nejpoužívanějších poloh.



SUPER MOBILNÍ KONSTRUKCE

- Nízká základna xMobility360™ (150 mm) s manuální nebo elektrickou aretací kol dle výběru.
- Čtyři kola otočná o 360° a volitelné páté kolo umožňují plynulé manévrování stolem dopředu, dozadu a do stran a otáčení kolem vlastní osy.
- Kola se nacházejí pod krytem základny, což omezuje hromadění se nečistot a usnadňuje úklid.
- Profilované otvory na chodidla na každé straně základny umožňují chirurgovi přistoupit blíže ke stolu, čímž zajišťují pohodlný přístup k operačnímu poli.
- Čtyři široce rozkročené podpěry blokují stůl na zvoleném místě, zajišťují stabilitu a bezpečnost.

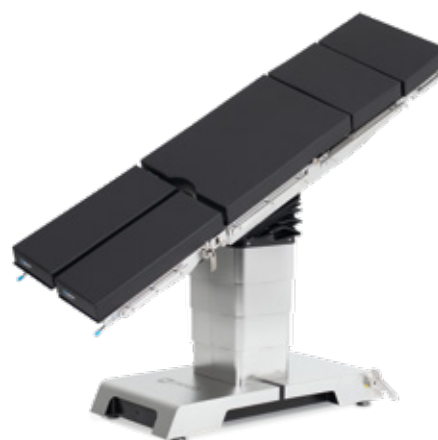

Famed X Line



Délka 2060 mm | Celková šířka 550 mm | Minimální výška 680 mm | Maximální výška 1080 mm | Poloha Trendelenburg 40° | Poloha Anti-Trendelenburg 40° | Boční náklon 30° | Podélný posuv 400 mm | Maximální zatížení 460 kg

Famed PRIME



Learn more!

EKONOMICKÝ OPERAČNÍ STŮL S MIMOŘÁDNOU PRECIZNOSTÍ A MOBILNOSTÍ

Univerzální a ekonomický operační stůl navržený s ohledem na jednoduchou obsluhu a spolehlivost. Famed PRIME nabízí elektrické nastavování klíčových funkcí stolu. RTG průhledná deska z plastu HPL a nízká, super mobilní základna umožňují spolupráci s C-ramenem. Řídicí systém xMotionPro™ zaručuje vysokou přesnost polohování desky. Ocelové prvky z nerezové oceli AISI 304 vyrobené technologií IntelliProtectPlus™ usnadňují dezinfekci a omezují usazování se nečistot. Super mobilní základna xMobility360™ je dostupná ve dvou variantách: z nerezové oceli nebo z ABS.



UNIVERZÁLNÍ A FUNKČNÍ

- Modulární konstrukce a široký výběr příslušenství usnadňují přizpůsobení stolu většině zákroků.
- Elektrické nastavení výšky, bočního a podélného sklonu a segmentu zad (volitelně).
- Manuální nastavování opěrky hlavy, podnožek, posuvu a vyvýšení bederní opěrky.
- K dispozici jsou dvě varianty konstrukce desky s možností montáže různých variant opěrek nohou a podhlavníků
- Možnost změny konfigurace desky.
- Vodovzdorné, antistatické matrace mFix™ z polyuretanové pěny s tloušťkou 80 mm.
- Segmenty desky se instalují s pomocí intuitivních rychlospojek s ochranou před vypadnutím.



INTUITIVNÍ A PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ

- Kabelový ovladač s displejem, boční ovládací panel montovaný na sloup stolu a alternativní pohon
- Tři různé provozní režimy umožňují přizpůsobit rychlost pohybů stolu potřebám chirurga*.
- Systém ovládání xMotionPro™ umožňuje měnit polohu desky stolu s přesností až 0,5 mm a 0,1°.
- Okamžitá reakce stolu na stisknutí a uvolnění tlačítka na ovladačích zajišťuje precizní polohování.
- Dotykový LCD displej na ovladači umožňuje snadné čtení parametrů nastavení desky, úrovně nabití baterií, potenciální kolize nebo chyby (volitelně).*
- Možnost uložení 4 nebo 8 nejpoužívanějších poloh.



SUPER MOBILNÍ KONSTRUKCE

- Nízká základna xMobility360™ (150 mm) vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli nebo z plastu ABS, dle výběru.
- Čtyři dvojité otočná kolečka 360° a volitelné páté kolo umožňují plynulé manévrování stolem dopředu, dozadu a do stran a otáčení kolem vlastní osy.
- Kola se nacházejí pod krytem základny, což omezuje hromadění se nečistot a usnadňuje úklid.
- Aretace koleček ovládaná ručním ovladačem** nebo aktivovaná nožní pákou – čtyři široce rozmístěné podpěry ukryté v základně zajišťují stabilitu a bezpečnost.
- Čtyři podpěry blokující stůl na zvoleném místě zajišťují stabilitu a bezpečnost.
- Profilované otvory na chodidla na každé straně základny umožňují chirurgovi přistoupit blíže ke stolu, čímž zajišťují pohodlný přístup k operačnímu poli.



Délka 2060 mm | Celková šířka 550 mm | Minimální výška 680 mm | Maximální výška 1080 mm | Poloha Trendelenburg 40°
Poloha Anti-Trendelenburg 40° | Boční náklon 30° | Podélný posun 340 mm | Maximální zatížení 350 kg

* Dostupné u verze stolu s kabelovým ovladačem s dotykovým LCD displejem.
** Ve verzi stolu se zdávkou seklí nastavovanou elektrohydraulickým pohonem.

Famed X LineTM



Famed FLARE



Learn more!

BEZPEČNÝ STŮL PRO SNÍMKOVÁNÍ S TECHNOLOGIÍ MINIMALIZUJÍCÍ ARTEFAKTY

Stůl pro snímání Famed FLARE je vybaven ultra tenkou, plně transparentní, plovoucí deskou z uhlíkových vláken v technologii TotalClear™, která zaručuje velmi jasný obraz s nejlepšími parametry transparentnosti na trhu a významně snižuje škodlivou dávku záření přenášenou na pacienta a zdravotnický personál. Deska stolu TotalClear™ umožní přesné umístění pacienta (plovoucí deska stolu s joystickem), které je důležité především během kardiovaskulárních, neurochirurgických, urologických, ortopedických operací a spinálních zákroků.




BEZPEČNOST PRÁCE

- Práce při maximálním zatížení až 230 kilogramů;
- Nejlepší parametr transparentnosti desky stolu na trhu - 0,33 mm Al;
- Parametry desky stolu snižují dávku záření přenášeného na pacienta a personál;
- Technologie TotalClear™ minimalizuje artefakty na snímcích a snižuje tak riziko nesprávné diagnózy a nutnost dalšího snímání;
- Stabilní základna ve tvaru písmene T zajišťuje stabilitu stolu a bezpečí pacienta;
- Dostupné dálkové ovladače a joystick jsou vybaveny dvojitou ochranou proti náhodné aktivaci a neúmyslnému pohybu desky stolu.



POHODLNÁ PRÁCE

- Ergonomická deska stolu a nízká základna (pouze 134 mm) bez vyčnívajících prvků poskytují dostatek prostoru pro volné manévrování ramenem C;
- Plynule nastavitelné lamely InfiniMove™ po celé délce zobrazovacího pole umožňují optimální výběr místa montáže příslušenství;
- Joystick pro ovládání plovoucí desky stolu usnadňuje nastavení do vhodné polohy vzhledem k ramenu C;
- Díky vhodnému tvaru základny stolu je možné přistoupit k pacientovi blíže;
- Tvarovaná základna z uhlíkových vláken poskytuje více prostoru pro nohy operátora a umožní tak zaujmout pozici co nejbližší k pacientovi;
- Nohy stolu vysouvateľné pomocí dálkového ovladače;
- Noha a základna stolu z uhlíkových vláken zkracují dobu potřebnou pro dezinfekci;
- Možnost ovládat stůl pomocí bezdrátového dálkového ovládání rCover™.

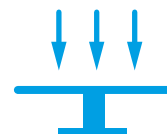

SNÍMKOVÁNÍ

- Prostor pro snímání dlouhý 1600 mm umožňuje provádět širokou škálu zákroků;
- Přídavný segment z uhlíkového vlákna prodlužuje zobrazovací okno o 300 mm;
- Zobrazovací okno 360° o délce 1460 mm;
- Boční posun desky ± 125 mm usnadňuje manipulaci ve vztahu k C-rameni;
- 2200 mm dlouhá deska stolu pro vysoké pacienty;
- Joystick je možné snadno připevnit k oběma stranám desky stolu;
- Deskou lze pohybovat také při laterálních a Trendelenburg náklonech;
- Speciální příslušenství (např. Ortopedické, gynekologické nebo neurologické) lze namontovat pomocí dvou pevných lišt nebo dvou adaptérů InfiniMove™ s plynulou změnou polohy.




Délka 2200 mm | Celková šířka 649 mm | Minimální výška 760 mm | Maximální výška 1160 mm | Poloha Trendelenburg 16° | Poloha Anti-Trendelenburg 25° | Boční náklon 20° | Podélný posun 530 mm | Transparentnost 0,33 mm Al | Maximální zatížení 180/230 kg

Famed HYPERION

MODERNÍ BARIATRICKÝ STŮL

Operační stůl Famed HYPERION je moderní produkt vytvořený pro nejnovější trendy v chirurgii. Může být použit k většině chirurgických zákroků, je skvělý pro bariatrickou chirurgii. Je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 dodatečně podrobené procesu elektrolytického leštění. Pohybuje se na sloupu **MobiWeight™**, na mobilní základně s elektrickým zámek kol. Matrace jsou antistatické, vodotěsné a zcela transparentní pro rentgenové paprsky. Povrchy stolu a matrace jsou velmi odolné vůči dezinfekčním prostředkům.

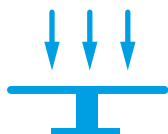

TRANSPARENTNOST

- Kompatibilní s C-ramenem;
- Operační stůl plně RTG transparentní;
- Šířka a délka desky stolu prodlužuje zobrazovací prostor - 1950 mm (celkem);
- Připojení desky z uhlíkových vláken a dlouhý podélný posun 400 mm dovolují pohodlné snímkování během operace s vysokou kvalitou snímků;
- Automatické rozpoznávání orientace desky stolu (rozpoznává umístění nožního segmentu a opěrky hlavy);
- Velký rozsah nastavení výšky a žádné vyčnívající části ze základny stolu zaručují spoustu prostoru pro práci s C-ramenem.



ZATÍŽENÍ

- Ideální stůl pro bariatrické operace;
- Vysoké maximální zatížení až 500 kg (celý rozsah pohybu do 400 kg);
- Široká deska stolu s možností rozšíření pomocí přídavných desek (celková šířka rozšířené desky stolu 770 mm);
- Nastavení výšky od 585 mm do 1050 mm;
- Změna polohy pacienta prováděna elektrohydraulicky pomocí tří dostupných ovladačů;
- Měkká, bezlatexová a antistatická matrace s funkcí „tvarové paměti“;
- Vyztužené příslušenství určené pro bariatrické pacienty;
- Mobilní základna navržena pro snadnou manipulaci (kola o průměru 150 mm).



LAPAROSKOPIE

- Vylepšený přístup během laparoskopických operací;
- Nízká poloha stolu zajišťuje snadný přístup pro laparoskopické nástroje;
- Samostatně nebo společně elektricky nastavitelné opěrky nohou;
- Laterální náklony;
- Tvar základny s velkým prostorem pro nohy chirurga (174 mm).



Délka 2335 mm | Celková šířka 630 mm | Minimální výška 585 mm | Maximální výška 1050 mm | Poloha Trendelenburg 40° | Poloha Anti-Trendelenburg 40° | Boční náklon 30° | Podélný posun 400 mm | Maximální zatížení 500 kg

Famed OPTIMA (5.20)




Learn more!

EKONOMICKÝ, MULTIDISCIPLINÁRNÍ OPERAČNÍ STŮL Z VYSOCE KVALITNÍCH MATERIÁLŮ

Elektricky ovládaný operační stůl umožňuje bez námahy přizpůsobit nastavení nárokům lékařského zákroku. Modulární konstrukce zajišťuje rychlou výměnu segmentů desky. Použití vysoce kvalitní oceli a uhlíkového vlákna zaručuje dlouhou životnost a snadnější dezinfekci. Široké spektrum speciálního příslušenství umožňuje stůl používat v neurochirurgii, kardiologii, ENT, MIS, bariatrii, gynekologii nebo všeobecné chirurgii. Jde o unikátní operační stůl plně pokrytý vysoce kvalitním uhlíkovým vláknem, v jehož konstrukci je použita nerezová ocel AISI 304 vyrobená technologií IntelliProtectPlus™.



UNIVERZÁLNÍ A MODULÁRNÍ

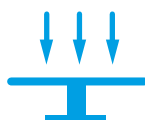

IDEÁLNÍ PRO LÉKAŘSKÉ ZOBRAZOVÁNÍ A MIS



MNOHO MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ

- Přídavné sekce umožňují prodloužení a rozšíření desky.
- Modulární konstrukce a rychlospojky použité v segmentech desky umožňují stůl snadno přizpůsobit požadovanému zákroku.
- Boční lišty s klíny chránícími příslušenství před vypadnutím – dokonce i během zákroků vyžadujících použití síly.
- Široký výběr příslušenství.
- Trendelenburgova poloha 40°.
- Vodovzdorné, antistatické matrace mFix™ z polyuretanové pěny s tloušťkou 80 mm.
- 5sekční deska ve standardu s možností montáže volitelných dvojité dělených opěrek nohou (6 sekci desky).
- Plně RTG průhledná deska – MAE 0,25 mm Al.
- Elektromechanický podélný posuv v rozsahu 400 mm, který zajišťuje rychlé a snadné polohování pacienta vůči C-ramenu.
- Nízká (125 mm), profilovaná základna ve tvaru písmene „T“ umožňuje snadný a bezpečný přístup pro C-rameno.
- 3D zobrazování 360° při použití doplňujících příslušenství.
- Základna a sloupek pokryté uhlíkovým vláknem chrání C-rameno a stůl před poškozením.
- Široký rozsah nastavení výšky a eliminování součástí vyčnívajících ze základny zajišťují hodně místa pro manévrování s C-ramenem.
- Zobrazovací okno o délce 1440 mm (standard).
- Stůl se standardně dodává s kabelovým ovladačem bbSafe™ s velkým 2,8palcovým displejem používajícím technologii IPS.
- Volitelně lze stůl ovládat bezdrátovým ovladačem rCover™.
- Pro pohodlí personálu může být na sloupku instalován rezervní ovládací panel pDetach™.
- Veškeré pohyby stolu (s výjimkou nastavení opěrky hlavy) se ovládají na dálkovém ovladači.
- Aretace (výsuvné patky) se ovládá na dálkovém ovladači.
- Ovladače byly vybaveny systémem, který chrání před náhodnou změnou polohy.
- Na displeji ovladače se zobrazují: úroveň nabití baterie, poloha desky a varování před vybitím akumulátoru, což umožňuje plánovat příští nabíjení.



Délka 2100 mm | Celková šířka 600 mm | Minimální výška 550 mm | Maximální výška 1020 mm | Poloha Trendelenburg 40° | Poloha Anti-Trendelenburg 40° | Boční náklon 30° | Podélný posuv 400 mm | Maximální zatížení 460 kg

Famed ULTIMA

ODOLNÝ OPERAČNÍ STŮL BEZ ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ

Plně funkční operační stůl bez elektrického ovládání eliminuje riziko závady téměř na nulu. Takový stůl je skvělý pro použití v místech bez přístupu k elektrické síti a tam, kde je oceňována především jednoduchost designu a servisu. Široká škála příslušenství umožňuje použití prakticky v jakémkoli typu chirurgických zákroků. Všechny ocelové komponenty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 v technologii IntelProtectPlus™ - elektrolytické pokovení oceli zaručuje snadnou dezinfekci a pomáhá chránit před usazováním prachu a nečistot.



UNIVERZÁLNÍ

- Možnost výběru ze čtyř typů pracovních desek (čtyři, pět a šest segmentů, volitelně také deska se 4 segmenty a deskovou podnožkou)
- Pohyblivá základna s centrálním systémem blokování ve dvou typech provedení: tvar „T“ (výsuvné třmeny) nebo tvar „H“ (Supermobil, velká kola pro usnadnění přesunu stolu);
- Deska stolu je RTG transparentní – může pracovat s C-ramenem;
- Vyjímatelné antistatické matrace vyrobené z polyuretanové pěny;
- Boční lišty se západkami proti vypadávání příslušenství;
- Je možné zaměnit opěrku hlavy a nožní segment a změnit tak charakteristiku stolu.



JEDNODUCHOST OBSLUHY

- Nastavení výšky stolu pomocí nožního pedálu;
- Laterální náklony, poloha Trendelenburg a anti-Trendelenburg, bederní opěrka, sklon zádového segmentu, opěrka hlavy a nožní segmenty jsou ovládány ručně;
- Většina pohybů, které vyžadují sílu personálu je podporována pomocí plynových pružin nebo hydraulickým čerpadlem.



VÍCE POLOH

- Odvoditelné nožní segmenty umožňují pohodlné odsunutí nohou pacienta;
- Rychlá demontáž nožních segmentů usnadní přístup k pacientovi;
- Lišty jsou vedeny po celé délce desky stolu a je k nim tedy kdekoli možno připevnit požadované příslušenství;
- Stůl je kompatibilní se speciálním neurochirurgickým a ortopedickým příslušenstvím;
- I přes nízkou hmotnost je stůl velmi stabilní a má vysokou maximální zatížitelnost, je k němu možné připojit i velké a těžké doplňkové příslušenství.



Délka 2060 mm | Celková šířka 550 mm | Minimální výška 685 mm | Maximální výška 985 mm | Poloha Trendelenburg 30°
Poloha Anti-Trendelenburg 30° | Boční náklon 25° | Maximální zatížení 200 kg

Famed SU-14

EKONOMICKÝ ZÁKROKOVÝ A TRANSPORTNÍ STŮL S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM VÝŠKY

Stůl určený pro polohování pacienta při procedurách a operacích v oblasti všeobecné chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, urologie, gynekologie, proktologie, laryngologie, oftalmologie a dalších. Elektrické ovládání s možností programování tří předdefinovaných nastavení stolu usnadňuje provoz a zkracuje dobu výkonu. Konstrukce z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, pokrytá polyester-epoxidovým práškovým lakem a plastová základna, umožňují snadnou a rychlou dezinfekci. Segmenty operační desky stolu jsou RTG transparentní.



VŠESTRANNOST

Operační stůl Famed SU-14 poskytuje komplexní řešení pro ambulantní jednodenní chirurgii. Jedná se o kombinaci zákrokového stolu a transportního vozíku. Stabilní kola s velkým průměrem usnadní překonání překážek, vestavěný držák kyslíkových lahví zajišťuje podporu pacienta během převozu.



ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkovým ovládáním lze nastavit: výšku desky stolu, boční náklon, pozice Trendelenburg a anti-Trendelenburg. V paměti dálkového ovládání **bbSafe™** je možné uložit tři předdefinovaná nastavení stolu a operační desky (např. vodorovná deska stolu).



VYSOKÁ KVALITA

Operační stůl SU-14 je vyráběn v Polsku. Veškerá výroba je soustředěna v továrně v Živci, a proto máme celou dobu kvalitu výroby pod kontrolou. Nejvyšší ocel ochrání váš stůl před poškozením a zajistí dlouhodobý a bezproblémový provoz.




Délka 2030 mm | Celková šířka 650 mm | Minimální výška 750 mm | Maximální výška 1050 mm | Poloha Trendelenburg 20°
Poloha Anti-Trendelenburg 20° | Maximální zatížení 200 kg

Matrace mFix™

BEZPEČNÉ A POHODLNÉ MATRACE PROTI PROLEŽENINÁM VYROBENÉ Z POLYURETANOVÉ PĚNY S TVAROVOU PAMĚTÍ

Antistatické, bezlatexové protiproleženinové matrace vyrobené ze tří vrstev pěny různé hustoty zajišťují vysoký komfort a bezpečnost pacienta i při dlouhodobých zákrocích. Vhodně zvolené materiály minimalizují riziko proleženin, nezpůsobují poruchy krevního oběhu a omezují riziko infekce. Voděodolný potah se svařovanými švy chrání před pronikáním tekutin a nečistot, usnadňuje čištění a dezinfekci a prodlužuje životnost matrace. Použití tří druhů pěny v kombinaci s pružným potahem umožňuje přizpůsobit matraci tvaru těla pacienta a snížit tlak.

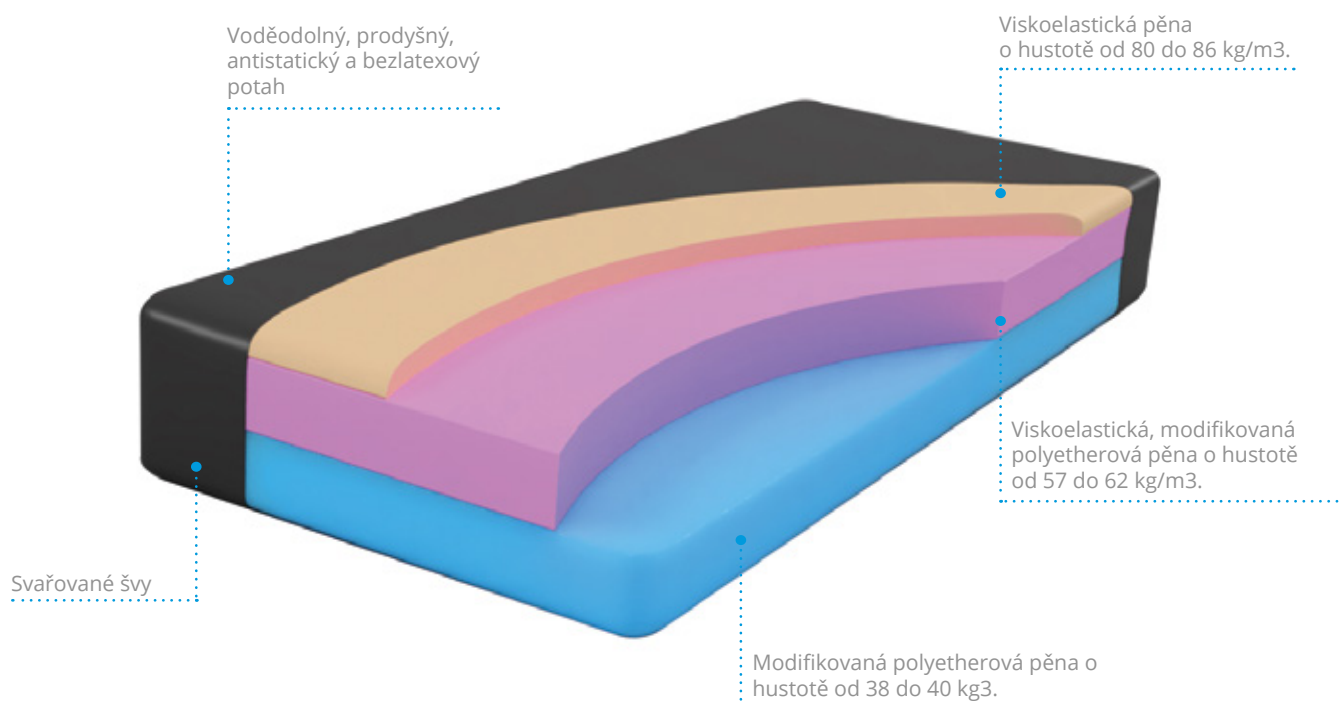

HLAVNÍ VLASTNOSTI:

- Chrání před vznikem proleženin díky použití tří druhů nehořlavé paměťové pěny (38–86 kg/m³).
- Přizpůsobuje se tvaru těla pacienta a snižuje tlak v místech, která jsou obzvláště náchylná k vzniku proleženin.
- Tloušťka 80 mm zajišťuje stabilní oporu během zákroků.
- Pružná vrstva minimalizuje tření a zabraňuje vzniku záhybů, což umožňuje bezpečné provádění několikahodinových procedur.
- Montážní systémy mFix™ (houbové spojky) zaručují stabilní upevnění k desce a rychlou demontáž.
- Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům zvyšuje životnost matrace a snižuje provozní náklady.
- Voděodolný polyuretanový potah se svařovanými švy chrání vnitřek matrace před pronikáním tekutin a nečistot.
- Polyuretanový potah povlaku zajišťuje vysokou prodyšnost a udržuje pokožku pacienta v dobrém stavu.
- Povlak je bez latexu a plně antistatický.





Technologie použité v produktech:



xMotionPro™

xMotionPro™ je řídicí systém nové generace, který do segmentu operačních stolů s elektro-hydraulickým pohonem vnáší naprosto nové standardy. Zajišťuje plynulé, stabilní pohyby a ultra precizní polohování s přesností až 0,5 mm a 0,1° — jeden z nejpřesnějších na trhu dostupných systémů. Umožňuje precizní uložení pacienta a rychlé zavádění korekcí během zákroku, čímž zkracuje čas polohování a zvyšuje bezpečnost za situací, kdy rozhoduje chirurgická přesnost. Ovládání je dostupné z úrovně kabelového ovladače s LCD displejem, bočního panelu a nožního ovladače, LCD displej usnadňuje čtení parametrů nastavení, úrovně nabití baterií a systémových zpráv (např. limitů, varování a chyb).



xMobility360™

xMobility360™ je řešení použité v nové základně operačního stolu, které zajišťuje plnou manévrovatelnost a umožňuje rychlé a přesné nastavení stolu na operačním sále. V základně skrytá 4 kola otočná o 360° s možností využití volitelného pátého kola – v systému inspirovaném písmenem X. Kola nainstalovaná uvnitř základny se pohybují do všech stran, takže je manévrování plynulé a nevyžaduje pohyby „do osmičky“, což urychluje polohování a repolohování stolu, především v omezeném prostoru. Prostor pro chodidla chirurga na každé straně zajišťuje snadnější přístup k operačnímu poli a lepší ergonomii práce.



TotalClear™

Tato technologie je výsledkem mnohaleté zkušenosti při navrhování různých prototypů desek stolů z uhlíkových vláken, experimenty s typy vláken a jejich uspořádání. Nespočet testů v profesionální měřicí laboratoři odhalil finální strukturu a směr uspořádání uhlíkových vláken v systému **TotalClear™** pro maximální snížení počtu artefaktů ve snímcích. Díky tomu může být dávka záření, které proniká do těla pacienta snížena a riziko nesprávné diagnostiky založené na snímkování se snižuje na minimum. Deska stolu **TotalClear™** se může pochlubit nejen vynikajícím parametrem transparentnosti, ale velmi jasnými snímky bez rušení. Deska stolu v technologii **TotalClear™** neobsahuje příčné vzpěry (bezrámová konstrukce), což dává celkovou transparentnost v rozsahu 360°.



fCharge™

Všechny články, které napájejí výrobky Famed Żywiec, jsou nakupovány od spolehlivého dodavatele, se kterým spolupracujeme již mnoho let. Každý článek **fCharge™** podléhá kontrole v externí společnosti, poté prochází několikastupňovou kontrolou v technologických odděleních naší továrny. Vestavěná nabíječka s technologií rychlého nabíjení **fCharge™** vám umožní rychle dodat článkům potřebné množství elektřiny. Několik desítek zaručených plných pracovních cyklů nabízí bezpečnost během každého lékařského zákroku.



IntelliProtectPlus™

Operační stoly s technologií **IntelliProtectPlus™** jsou vyrobeny z vysoce legované korozivzdorné nerezové oceli AISI 304 (podle evropských norem označené X5CrNi18-10 / 1.4301). Díky vysokému obsahu niklu a chromu se vyznačuje vysokou odolností proti korozi. Pro další ochranu oceli jsme také zavedli proces elektrolytického leštění a pasivace. Elektrolytické leštění je proces, jehož cílem je odstranit nečistoty, vyhladit a obnovit povrch oceli do náležité pasivní vrstvy, která ji chrání proti korozi. Díky technologii **IntelliProtectPlus™** se na povrchu oceli našich výrobků hromadí atomy chromu a jejich struktura se stává tvrdší. Vyhlazený a vyleštěný povrch navíc zajišťuje snadnou dezinfekci a údržbu výrobku a pomáhá chránit před usazováním prachu a nečistot. Ocelové povrchy s technologií **IntelliProtectPlus™** jsou chráněny i proti poškrábání povrchu - vlivem vzdušného kyslíku dochází v poškozeném místě k pasivaci a riziko koroze je vyloučeno. Vybrané vnitřní konstrukční součásti, včetně svařovaných oblastí a obráběných povrchů, jsou navíc chráněny zinkovým povlakem pro zvýšení jejich odolnosti proti korozi.



bbSafe™

Trojité ochrana před náhodnou změnou polohy na dálkovém ovladači. Ovladač se po určité době nečinnosti (nastavitelné) automaticky vypne. Proces změny polohy je navíc dvoukrokový. Systém **bbSafe™** také varuje uživatele, když pohyb stolu silně zatěžuje články akumulátoru - umožní to lépe předvídat spotřebu energie a naplánovat čas nabíjení. Dálkové ovládání **bbSafe™** disponuje 2,8 " obrazovkou v technologii IPS, která vám rychle a přesně ukáže změnu nastavení polohy v reálném čase. Dálkový ovladač splňuje standard krytí IP67.



pDetach™

Panel pro ovládání operačního stolu umístěný na sloupu, který lze sejmut a použít jako tradiční dálkové ovládání. Poskytuje plnou funkčnost při nastavování poloh stolu. Panel má pohodlný magnetický mechanismus **pDetach™**, který jej chrání před náhodným sejmutím a zároveň umožňuje jednoduchou a rychlou manipulaci.



rCover™

Technologie vestavěná do bezdrátového ovladače zabraňuje rušení jiných bezdrátových zařízení, která pracují na operačním sále. Součástí systému je také speciální postup párování stolu s dálkovým ovládáním a správně nastavené omezení síly signálu. Dálkový ovladač **rCover™** je vybaven výkonnou baterií a dokovací stanicí s bezdrátovou nabíječkou.



MobiWeight™

Pečuje o bezpečí pacienta a zabraňuje přílišnému vybíjení baterie. Rovněž řídí plynulý pohyb a pozvolný start pohybu stolu. **MobiWeight™** díky systému dvojitého posunu výšky umožňuje nastavit výšku stolu velmi blízko k podlaze. Vysoká nosnost díky technologii **MobiWeight™** také neomezuje podélný posuv desky stolu a počet dostupných poloh stolu.



InfiniMove™

Deska stolu má speciální prohlubně na jednoduchou montáž dalších lišt pro příslušenství. Hlavními rysy adaptérů **InfiniMove™** je možnost rychle měnit umístění příslušenství a rychlá demontáž lišt (nebudou překážet během zákroku a vytvářet artefakty během snímkování). Lišty mají na koncích západky, které chrání příslušenství před náhodnou demontáží.



AlterSafePro™

Záložní řídicí systém typu override umožňující provádět základní pohyby stolní desky nezávisle na hlavním řídicím modulu v případě jeho poruchy. Je vybaven přídatným nezávislým zdrojem napájení, který umožňuje provést až 14 úplných funkčních cyklů operačního stolu. Ovládání je zajištěno pomocí samostatného ovládacího panelu umístěného na sloupu stolu, vybaveného ochranou proti nechtěné aktivaci.



TECHNICKÁ DATA

	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.70)	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.60)	Famed PRIME SU-03
Délka	2100 mm	2060 mm	2060 mm
Celková šířka	600 mm	550 mm	550 mm
Nastavení výšky (bez matrace)	680 - 1080 mm	680 - 1080 mm	680 - 1080 mm
Poloha Trendelenburg	40°	40°	40°
Poloha Anti-Trendelenburg	40°	40°	40°
Laterální náklony	30°	30°	30°
Horizontální posun	400 mm	400 mm	340 mm
Stupeň krytí	IP-X4	IP-X4	IP-X4
Maximální zatížení	460 kg	460 kg	350 kg






Famed FLARE SU-07	Famed HYPERION SU-15.5	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.20)	Famed ULTIMA SU-02	Famed SU-14
2200 mm	2335 mm	2100 mm	2060 mm	2030 mm
649 mm	630 mm	600 mm	550 mm	650 mm
760 - 1160 mm	585 - 1050 mm	550 - 1020 mm	685 - 985 mm	690 - 990 mm
16°	40°	40°	30°	20°
25°	40°	40°	30°	25°
20°	30°	30°	25°	20°
530 mm	400 mm	400 mm	-	-
IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4
180/230 kg	500 kg	460 kg	200 kg	200 kg



Also see our
acesories portfolio:

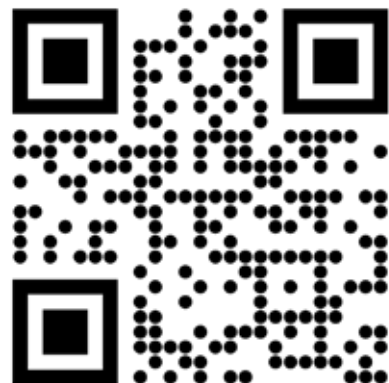



Member of **REINSBERG® GROUP**

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polsko

Kancelář:

tel.: +48 33 866 62 00

Export:

tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Vydání 152/2026/07/15 Společnost Famed Żywiec si vyhrazuje právo na změnu výrobku a specifikací v rámci technického pokroku. Všechny ilustrace a fotografie použité v tomto materiálu, jsou použity pouze pro demonstrační účely a nemusí odpovídat hotovému výrobku. Osoby zobrazené na fotografiích nejsou lékaři. Jsou to modelky. Prostředky uvedené v katalogu jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních oprávněnými osobami po předchozím seznámení se s návodem k obsluze.