



FAMED

Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

КАТАЛОГ
ИЗДЕЛИЙ

www.famed.com.pl

СОДЕРЖАНИЕ

1. Famed OPTIMA SU-05.70

Ультрапрецизионный, сверхмобильный операционный стол, выполненный из премиальных материалов.

2. Famed OPTIMA SU-05.60

Универсальный и экономичный операционный стол с микрорегулировками и сверхмобильным основанием

3. Famed PRIME

Экономичный операционный стол с исключительной точностью и мобильностью.

4. Famed FLARE

Стол для визуализации с технологией TotalClear™.

5. Famed HYPERION

Передовой бариатрический стол.

6. Famed OPTIMA SU-05.20

Экономичный, мультидисциплинарный операционный стол, выполненный из высококачественных материалов.

7. Famed ULTIMA

Надёжный операционный стол без электропривода.

8. Famed SU-14

Соединение процедурного стола с тележкой для транспортировки пациента.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

X-line™

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

xMotionPro™



xMobility360™



Основой X-Line™ являются два ключевых элемента:

01

ультрапрецизионное позиционирование и сверхмобильная конструкция. Регулировка столешницы с точностью до 0,5 мм и 0,1° позволяет точно адаптировать положение пациента к требованиям множества медицинских процедур, включая роботизированные операции и интраоперационную визуализацию.


02

Мобильность 360° обеспечивает плавное маневрирование столом и его точную установку даже в ограниченном пространстве, среди большого количества оборудования.



Discover Famed X-Line™:

Famed OPTIMA 5.70
Famed OPTIMA 5.60
Famed PRIME

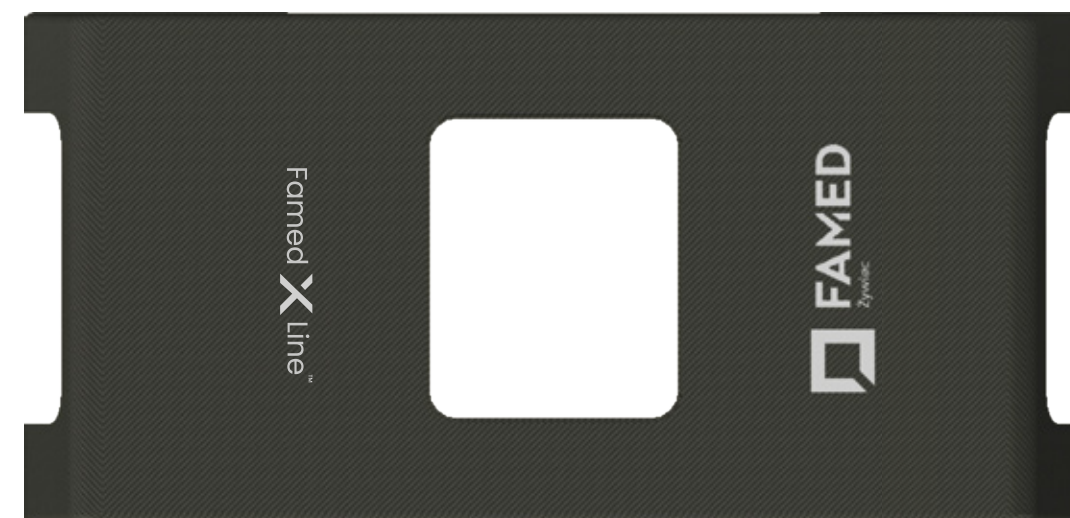

На практике X-Line™ обеспечивает команде больший контроль над позиционированием пациента, более эффективную организацию операционной и повышенный комфорт и эргономику работы.

X-Line™

X-Line™ — это новое поколение операционных столов, разработанное в ответ на реальные потребности современных операционных блоков: растущее количество оборудования в зале, ограниченное пространство и всё более высокие требования к точному и повторяемому позиционированию пациента. В хирургии каждый миллиметр имеет значение — поэтому мы создали инструмент, который с хирургической точностью позволяет управлять положением пациента на операционном столе и одновременно облегчает организацию рабочего пространства среди оборудования.



Famed OPTIMA (5.70)



Learn more!

УЛЬТРАПРЕЦИЗИОННЫЙ, СВЕРХМОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ПРЕМИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Операционный стол с ультрапрецизионной системой управления xMotionPro™ и регулировкой скорости движений столешницы. Сверхмобильное основание xMobility360™ облегчает маневрирование и установку стола в операционной. Модульная конструкция позволяет быстро заменять сегменты столешницы, а использование высококачественной нержавеющей стали и углеродного волокна обеспечивает долговечность и облегчает дезинфекцию. Широкий выбор специализированных аксессуаров в сочетании с превосходной точностью обеспечивает универсальное применение стола в различных медицинских процедурах.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НАСТРАИВАЕМЫЙ

- Модульная конструкция и широкий выбор аксессуаров облегчают адаптацию стола к большинству процедур.
- Все движения стола (кроме регулировки подголовника) управляются с пульта.
- Конструкция столешницы, состоящая из секции спинки, секции поясничной поддержки и секции сиденья, с возможностью установки различных вариантов подножек и подголовников.
- Водонепроницаемые, антистатические матрасы mFix™ из полиуретановой пены толщиной 80 мм.
- Аксессуары направляющие с защитой от выпадения аксессуаров.
- Колонны и основание выполнены из углеродного волокна или нержавеющей стали по технологии IntelliProtectPlus™ (на выбор).
- Рентгенопрозрачная столешница из углеродного волокна или HPL (на выбор).
- Окно для визуализации длиной 1440 мм (в стандартной комплектации).



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Три различных режима работы позволяют настроить скорость движений стола в соответствии с потребностями хирурга.
- Система управления xMotionPro™ обеспечивает изменение положения столешницы с точностью до 0,5 мм и 0,1°.
- Мгновенная реакция стола на нажатие и отпускание кнопки на контроллерах обеспечивает точное позиционирование.
- Проводной пульт с дисплеем в стандартной комплектации; опционально: боковая панель управления, установленная на колонне стола, и альтернативный привод.
- Сенсорный LCD-дисплей на пульте позволяет легко считывать параметры положения столешницы, уровень заряда батареи, возможные коллизии или ошибки.
- Возможность сохранения 8 наиболее часто используемых положений.



СВЕРХМОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Низкое основание xMobility360™ (150 мм), отсутствие выступающих элементов и конструкция из углеродного волокна обеспечивают безопасный доступ для С-дуги.
- Четыре поворотных колеса 360° и опциональное пятое колесо обеспечивают плавное маневрирование столом вперед, назад, в стороны и вращение вокруг собственной оси.
- Колёса размещены под защитным кожухом основания, что снижает накопление загрязнений и облегчает поддержание чистоты.
- Блокировка колёс управляется с пульта — четыре широко расставленные опоры, скрытые в основании, обеспечивают стабильность и безопасность.
- Профилированные выемки для стоп с каждой стороны основания позволяют хирургу подойти ближе к столу, обеспечивая удобный доступ к операционному полю.



Длина 2100 мм | Полная ширина 600 мм | Минимум высоты 680 мм | Максимальная высота 1080 мм | Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 460 кг

Famed OPTIMA (5.60)



Learn more!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ С МИКРОРЕГУЛИРОВКАМИ И СВЕРХМОБИЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ.

Универсальный операционный стол, сочетающий широкий диапазон положений, высокую максимальную нагрузку и отличные параметры рентгенопрозрачности и продольного перемещения столешницы. Ультрапрецизионное управление xMotionPro™ с точностью до 0,5 мм и 0,1° улучшает позиционирование, а сверхмобильное основание xMobility360™ облегчает маневрирование столом в операционной. Стальные элементы, выполненные из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 по технологии IntelliProtectPlus™, облегчают дезинфекцию и уменьшают оседание загрязнений. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет использовать стол при выполнении множества медицинских процедур.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НАСТРАИВАЕМЫЙ

- Модульная конструкция и широкий выбор аксессуаров облегчают адаптацию стола к большинству процедур.
- Рентгенопрозрачная столешница из материала HPL.
- Водонепроницаемые, антистатические матрасы mFix™ из полиуретановой пены толщиной 80 мм.
- Боковые направляющие с защитой от выпадения аксессуаров.
- Возможность замены подголовника на подножки и изменения конфигурации стола.
- Все движения стола (кроме регулировки подголовника и подножек) управляются с пульта.
- Доступны два варианта конструкции столешницы с возможностью установки различных вариантов подножек и подголовников.




МИКРОРЕГУЛИРОВКИ

- Три различных режима работы позволяют настроить скорость движений стола в соответствии с потребностями хирурга.
- Система управления xMotionPro™ обеспечивает изменение положения столешницы с точностью до 0,5 мм и 0,1°.
- Мгновенная реакция стола на нажатие и отпускание кнопки на контроллерах обеспечивает точное позиционирование.
- Проводной пульт с дисплеем в стандартной комплектации; опционально: боковая панель управления, установленная на колонне стола, и альтернативный привод.
- Сенсорный LCD дисплей на пульте позволяет легко считывать параметры положения столешницы, уровень заряда батареи, возможные коллизии или ошибки.
- Возможность сохранения 8 наиболее часто используемых положений.



СВЕРХМОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Низкое основание xMobility360™ (150 мм) с ручной или электрической блокировкой колёс — на выбор.
- Четыре поворотных колеса 360° и опциональное пятое колесо обеспечивают плавное маневрирование столом вперед, назад, в стороны и вращение вокруг собственной оси.
- Колёса размещены под защитным кожухом основания, что снижает накопление загрязнений и облегчает поддержание чистоты.
- Профилированные выемки для стоп с каждой стороны основания позволяют хирургу подойти ближе к столу, обеспечивая удобный доступ к операционному полю.
- Четыре широко расставленные опоры, фиксирующие стол в выбранном месте, обеспечивают стабильность и безопасность.

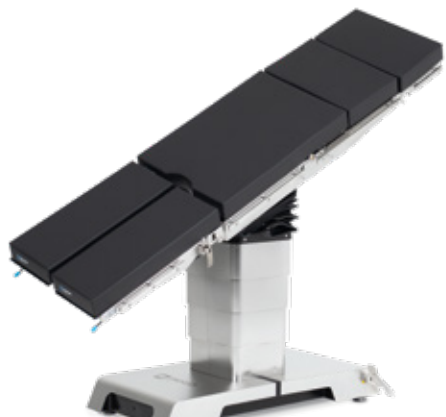

Длина 2060 мм | Полная ширина 550 мм | Минимум высоты 680 мм | Максимальная высота 1080 мм | Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 460 кг

Famed PRIME

ЭКОНОМИЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ С
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ И МОБИЛЬНОСТЬЮ.

Универсальный и экономичный операционный стол, разработанный с учётом простоты эксплуатации и надёжности. Famed PRIME предлагает электрическую регулировку ключевых функций стола. Рентгенопрозрачная столешница из материала HPL и низкое, сверхмобильное основание позволяют использовать стол с С-дугой. Система управления xMotionPro™ гарантирует высокую точность позиционирования столешницы. Стальные элементы выполнены из нержавеющей steel AISI 304 по технологии IntelliProtectPlus™, что облегчает дезинфекцию и снижает оседание загрязнений. Сверхмобильное основание xMobility360™ доступно в двух вариантах: из нержавеющей стали или ABS.



Learn more!



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Модульная конструкция и широкий выбор аксессуаров облегчают адаптацию стола к большинству процедур.
- Электрическая регулировка высоты, боковых и продольных наклонов, а также сегмента спинки (опционально).
- Ручная регулировка подголовника, подножек, продольного перемещения и подъёма почечного моста.
- Доступны два варианта конструкции столешницы с возможностью установки различных вариантов подножек и подголовников.
- Возможность изменения конфигурации столешницы.
- Водонепроницаемые, антистатические матрасы mFix™ из полиуретановой пены толщиной 80 мм.
- Сегменты столешницы крепятся с помощью интуитивных быстросъёмных замков с защитой от выпадения.



ИНТУИТИВНОЕ И ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Проводной пульт управления с дисплеем, боковая панель управления, установленная на колонне стола, и альтернативный привод.
- Три различных режима работы позволяют настроить скорость движений стола в соответствии с потребностями хирурга*.
- Система управления xMotionPro™ обеспечивает изменение положения столешницы с точностью до 0,5 мм и 0,1°.
- Мгновенная реакция стола на нажатие и отпускание кнопки на контроллерах обеспечивает точное позиционирование.
- Сенсорный LCD дисплей на пульте позволяет легко считывать параметры положения столешницы, уровень заряда батареи, возможные коллизии или ошибки (опция)*.
- Возможность сохранения 4 или 8* наиболее часто используемых положений.



СВЕРХМОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Низкое основание xMobility360™ (150 мм), выполненное из высококачественной нержавеющей стали или ABS — на выбор.
- Четыре двойных поворотных колеса 360° и опциональное пятое колесо обеспечивают плавное маневрирование столом вперёд, назад, в стороны и вращение вокруг собственной оси.
- Колёса размещены под защитным кожухом основания, что снижает накопление загрязнений и облегчает поддержание чистоты.
- Блокировка колёс управляется с пульта** или активируется ножным рычагом — четыре широко расставленные опоры, скрытые в основании, обеспечивают устойчивость и безопасность.
- Четыре опоры, фиксирующие стол в выбранном месте, обеспечивают стабильность и безопасность.
- Профилированные выемки для стоп с каждой стороны основания позволяют хирургу подойти ближе к столу, обеспечивая удобный доступ к операционному полю.



Длина 2060 мм | Полная ширина 550 мм | Регулировка высоты 1080 мм | Положение Тренделенбурга 40°
Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 340 мм | Максимальная нагрузка 350 kg

Famed X Line™



* Доступно в версии стола с проводным пультом с сенсорным LCD-дисплеем.
** В версии стола с секцией спинки, регулируемой электрогидравлическим приводом.

Famed FLARE

БЕЗОПАСНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ,
КОТОРАЯ МИНИМИЗИРУЕТ АРТЕФАКТЫ

Стол для визуализации Famed FLARE оснащен ультратонкой, полностью прозрачной, плавающей столешницей из углеродного волокна в технологии TotalClear™, которая гарантирует очень четкие изображения и лучший на рынке параметр прозрачности, что ограничивает вредную дозу облучения, которая передается пациенту и медперсоналу. Столешница TotalClear™ это также точное позиционирование пациента (плавающая столешница с джойстиком), что доказывает свою применимость во время процедур сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологической, ортопедической хирургии или терапии при болях спины.



Learn more!




БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Операции с максимальной нагрузкой до 230 кг;
- Наилучший показатель прозрачности столешницы на рынке - 0,33 мм Al;
- Параметры стола позволяют ограничить дозу передаваемого излучения пациенту и медперсоналу;
- Технология TotalClear™ минимизирует помехи на изображениях, уменьшая риск ошибочного диагноза и необходимости выполнения дополнительных копий;
- Стабильная основа в форме буквы «Т» обеспечивает стабильность стола и заботится о безопасности пациента;
- Доступные пульта и джойстик имеют двойную защиту от случайной активации и непреднамеренного движения столешницы.




УДОБСТВО РАБОТЫ

- Эргономичная столешница и низкое основание (всего 134 мм) без выступающих элементов обеспечивают достаточно места для свободного маневрирования С-образной дугой;
- Бесступенчатая регулировка планок InfiniteMove™ по всей длине поля визуализации позволяет оптимально выбрать место для крепления аксессуаров;
- Джойстик для управления плавающей столешницей помогает установить столешницу в удобном положении относительно С-образного плеча;
- Профилированное основание из углеродного волокна обеспечивает больше места для ног, что позволяет ближе подойти к пациенту;
- Ножки, выдвигающиеся с помощью пульта, блокируют стол в выбранном месте;
- Колонна и основание из углеродного волокна сокращают время дезинфекции;
- Возможность управления столом с помощью беспроводного пульта rCover™.

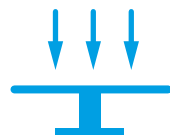

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА

- Окно визуализации длиной 1661 мм позволяет выполнять широкий спектр процедур;
- Боковое смещение ± 125 мм облегчает изменение положения по отношению к С-образному плечу;
- Окно для визуализации 360° длиной 1460 мм;
- Дополнительная приставка из углеродного волокна увеличивает окно визуализации на 300 мм;
- Столешница длиной 2200 мм позволяет удобно расположить пациентов высокого роста;
- Джойстик, устанавливаемый с обеих сторон столешницы, позволяет быстро менять положения столешницы;
- Приводы позволяют столешнице двигаться также при наклонах;
- Специальные приставки (например, ортопедические, гинекологические или неврологические) можно прикрепить на двух фиксированных планках или на двух адаптерах InfiniMove™, положение которых можно менять.

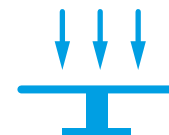

ПРОЗРАЧНОСТЬ

- Совместим с С-образным плечом;
- Столешница операционного стола прозрачная для рентгеновских лучей;
- Ширина и длина столешницы максимизируют площадь визуализации - 1950 мм (всего);
- Сочетание столешницы из углеродного волокна и продольного перемещения 400 мм позволяет проводить интраоперационную визуализацию и получить высококачественное изображение;
- Автоматическое распознавание ориентации стола (распознает местоположение секции ног и изголовья);
- Широкий диапазон регулировки высоты и отсутствие выступающих элементов основания гарантируют много места для работы С-образного плеча.



НАГРУЗКА

- Идеальная платформа для бариатрических операций;
- Высокая максимальная нагрузка до 500 кг (полное сочленение до 400 кг);
- Широкое ложе столешницы с возможностью добавления адаптеров для увеличения ширины (общая ширина столешницы с боковыми адаптерами 770 мм);
- Регулировка высоты от 585 мм до 1050 мм;
- Позиционирование пациента поддерживается электрогидравлическими приводами с помощью трех доступных контроллеров;
- Мягкий, не латексный и антистатический матрас с функцией «запоминания формы»;
- Усиленные аксессуары, предназначенные для бариатрических пациентов;
- Мобильное основание для легкого перемещения (колеса 150 мм).



ЛАПАРОСКОПИЯ

- Улучшенный доступ в ходе лапароскопических процедур;
- Низкое положение стола обеспечивает легкий доступ для лапароскопических инструментов;
- Отдельная или одновременная электрическая регулировка опор для ног;
- Боковые наклоны;
- Контурное основание с большим количеством места для ног для хирурга (174 мм).



Длина 2200 мм | Полная ширина 649 мм | Регулировка высоты 760 - 1160 мм | Положение Тренделенбурга 16° | Обратное положение Тренделенбурга 25° | Боковые наклоны 20° | Продольное перемещение столешницы 530 мм | Максимальная нагрузка 180/230 kg



Длина 2335 мм | Полная ширина 630 мм | Регулировка высоты 585 мм - 1050 мм | Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 500 kg

Famed OPTIMA (5.20)




ЭКОНОМИЧНЫЙ, МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Электрически управляемый операционный стол позволяет без усилий настроить параметры в соответствии с требованиями медицинской процедуры. Модульная конструкция обеспечивает быструю замену сегментов столешницы. Использование высококачественной стали и углеродного волокна гарантирует долговечность и облегчает дезинфекцию. Широкий выбор специализированных аксессуаров позволяет использовать стол в нейрохирургии, кардиологии, ЛОР-процедурах, MIS, бариатрии, гинекологии и общей хирургии. Это уникальный операционный стол, полностью покрытый высококачественным углеродным волокном, в конструкции которого используется нержавеющая сталь AISI 304 по технологии IntelliProtectPlus™.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ

- Дополнительные секции позволяют удлинять и расширять столешницу.
- Модульная конструкция и быстросъёмные замки, применённые в сегментах столешницы, позволяют легко адаптировать стол к конкретной процедуре.
- Боковые направляющие с клиновыми фиксаторами предотвращают выпадение аксессуаров — даже во время процедур, требующих применения силы.
- Широкий выбор аксессуаров.
- Положение Тренделенбурга 40°.
- Водонепроницаемые, антистатические матрасы mFix™ из полиуретановой пены толщиной 80 мм.
- Пятисекционная столешница в стандартной комплектации с возможностью установки опциональных двойных подножек (6 секций столешницы).

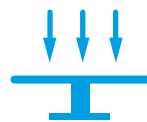

ИДЕАЛЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И MIS

- Полностью рентгенопрозрачная столешница — МАЕ 0,25 мм Al.
- Электромеханическое продольное перемещение в диапазоне 400 мм обеспечивает быстрое и лёгкое позиционирование пациента относительно С-дуги.
- Низкое (125 мм), профилированное основание в форме буквы «Т» обеспечивает лёгкий и безопасный доступ для С-дуги.
- 3D-визуализация на 360° при использовании дополнительных аксессуаров.
- Основание и колонна, покрытые углеродным волокном, защищают С-дугу и стол от повреждений.
- Широкий диапазон регулировки высоты и отсутствие выступающих элементов основания обеспечивают много пространства для маневрирования С-дугой.
- Окно для визуализации длиной 1440 мм (в стандартной комплектации).



МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

- Стол стандартно поставляется с проводным пультом bbSafe™ с большим 2,8-дюймовым экраном IPS.
- Опционально стол может управляться беспроводным пультом rCover™.
- Для удобства персонала на колонне может быть установлен резервный панельный контроллер pDetach™.
- Все движения стола (кроме регулировки подголовника) управляются с пульта.
- Блокировка (выдвижные опоры) управляется с пульта.
- Пульты оснащены системой защиты от случайного изменения положения.
- На экране пульта отображаются: уровень заряда батареи, положение столешницы и предупреждение о разряде аккумулятора, позволяющее заранее запланировать следующий зарядный цикл.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Четыре типа столешницы на выбор (четырёх-, пяти- и шести- сегментная, опционально также 4-сегментная столешница с плиточной подножкой);
- Подвижное основание с центральной системой, которая блокируется в двух положениях на выбор: форма „Т” (опущенные ноги) или форма „Н” (Supermobil, большие колеса облегчают езду столом);
- Прозрачная для рентгеновских лучей столешница – возможность работать с С-образным плечом;
- Съёмные антистатические матрасы изготовлены из пенополиуретана;
- Боковые планки с защитой от выпадения аксессуаров;
- Возможность заменить подголовник подножками и изменить характеристики стола.



ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВКИ

- Регулировка высоты столешницы осуществляется ножным насосом;
- Боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, поднятие почечного мостика, наклон подпоры спины, подголовник и подножки регулируются вручную;
- Большинство движений, которые требуют усилий со стороны персонала, поддерживаются с помощью газовых пружин или благодаря гидравлическому насосу.



РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

- Отклоняющиеся подножки позволяют удобно развести ноги пациента;
- Быстрая разборка ножных секций позволяет близко подойти к пациенту;
- Наличие планок по всей длине секции позволяет удобно закрепить оснащение в удобном для хирурга месте;
- Стол совместим со специальными нейрохирургическими и ортопедическими приставками;
- Несмотря на небольшой вес, стол очень устойчив и имеет высокий параметр максимальной грузоподъёмности, благодаря чему можно монтировать большие и тяжёлые дополнительные аксессуары.



Длина 2100 мм | Полная ширина 600 мм | Минимум высоты 550 мм | аксимальная высота 1020 мм | Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 460 kg

Famed ULTIMA

ПРОЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ БЕЗ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ

Полнофункциональный операционный стол без электроуправления – это снижение риска поломки почти до нуля. Такой стол отлично подходит для использования в местах, где нет доступа к питанию и где ценится простота конструкции и обслуживания. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет его практически в любом виде операций. Все стальные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 в технологии IntelliProtectPlus™ - сталь, обработанная методом электрополировки, гарантирует легкую дезинфекцию и помогает защитить от отложений пыли и грязи.



Длина 2060 мм | Полная ширина 550 мм | Регулировка высоты 685 - 985 мм | Положение Тренделенбурга 30° | Обратное положение Тренделенбурга 30° | Боковые наклоны 25° | Максимальная нагрузка 200 kg

Famed SU-14

КОМБИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧНОГО ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА С ТЕЛЕЖКОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА.

Стол предназначен для расположения пациента во время проведения процедур и операций в области общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, отоларингологии, офтальмологии и других. Электрическое управление с возможностью программирования трех предустановленных положений стола упрощает эксплуатацию и сокращает время процедуры. Конструкция из высококачественной углеродистой стали, покрытой полиэфирно-эпоксидной порошковой краской, в сочетании с пластиковой основой обеспечивает легкую и быструю дезинфекцию. Рентгенопрозрачные сегменты столешницы позволяют выполнять рентгенографию и контролировать состояние пациента с помощью С-дуги.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Операционный стол Famed SU-14 представляет собой комплексное решение для амбулаторной хирургии или хирургии одного дня. Это комбинация операционного стола с медицинской каталкой. Стабильные колеса большого диаметра позволяют преодолевать препятствия в коридорах, встроенный держатель для емкостей обеспечивает безопасность пациента.



ЛЕГКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

С помощью пульта можно регулировать высоту столешницы, боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга. Система управления позволяет запрограммировать на пульте три предустановленных положения стола и столешницы. Регулировка спинной секции, угла наклона ножных секций и подголовника осуществляется вручную с поддержкой газовых пружин с фиксацией.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Рентгенопрозрачная столешница, выполненная из материала HPL, позволяет проводить интраоперационную визуализацию, а матрасы из полиуретановой пены защищают пациента от образования пролежней во время процедур. Специальные ручки, установленные на секции спинной опоры, облегчают перемещение стола. Центральная блокировка колес обеспечивает стабильность, а направляющее колесо облегчает передвижение по длинным коридорам. Боковые рейки по всей длине позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.




Длина 2030 мм | Полная ширина 650 мм | Минимальная высота 750 мм | Максимальная высота 1050 мм | Положение Тренделенбурга 20°
Обратное положение Тренделенбурга 20° | Максимальная нагрузка 200 kg

Матрасы mFix™


БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ МАТРАСЫ С АНТИДЕСЮРЕЗАМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

Антистатичные противолежневые матрасы без содержания латекса, изготовленные из трёх слоёв пены различной плотности, обеспечивают высокий комфорт и безопасность пациента даже при длительных процедурах. Тщательно подобранные материалы минимизируют риск образования пролежней, предотвращают нарушения кровообращения и снижают риск инфицирования. Водонепроницаемый чехол со сварными швами защищает от проникновения жидкостей и загрязнений, облегчает чистку и дезинфекцию, а также продлевает срок службы матраса. Использование трёх видов пены в сочетании с эластичным чехлом позволяет матрасу адаптироваться к форме тела пациента и снижать давление.

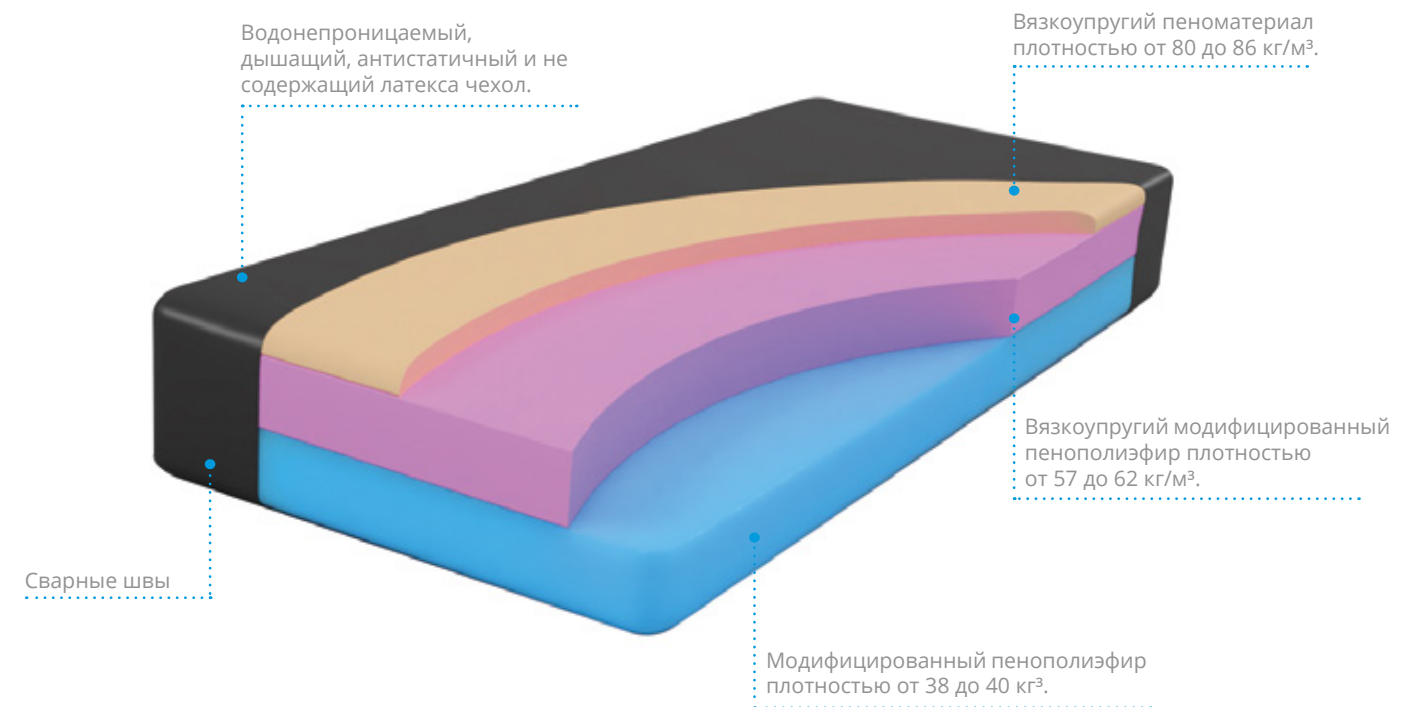

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Защищает от пролежней благодаря использованию трёх видов негорючей пены с эффектом памяти (38–86 кг/м³).
- Принимает форму тела пациента, снижая давление в зонах, особенно подверженных образованию пролежней.
- Толщина 80 мм обеспечивает стабильную поддержку во время процедур.
- Гибкий чехол минимизирует трение и предотвращает образование складок, обеспечивая безопасное проведение длительных процедур.
- Системы крепления mFix™ (грибовидные замки) гарантируют надёжное крепление к столешнице и быстрое снятие.
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам продлевает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы.
- Водонепроницаемый полиуретановый чехол со сварными швами защищает внутреннюю часть матраса от жидкостей и загрязнений.
- Полиуретановый чехол обеспечивает высокую воздухопроницаемость и поддерживает кожу пациента в хорошем состоянии.
- Чехол не содержит латекса и полностью антистатичен.

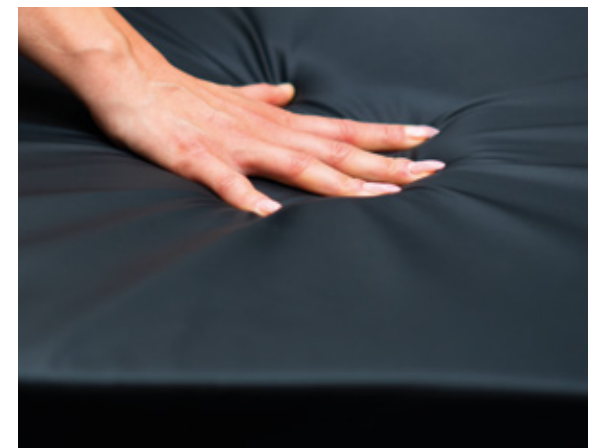

Technologies applied in the products:



xMotionPro™

xMotionPro™ — это система управления нового поколения, которая устанавливает совершенно новые стандарты в сегменте операционных столов с электро-гидравлическим приводом. Она обеспечивает плавные, стабильные движения и ультрапрецизионное позиционирование с точностью до 0,5 мм и 0,1° — один из самых точных доступных на рынке систем. Позволяет точно расположить пациента и быстро вносить корректировки во время процедуры, сокращая время позиционирования и повышая безопасность в ситуациях, где важна хирургическая точность. Управление доступно с проводного пульта с LCD-дисплеем, боковой панели и ножного контроллера, а LCD-экран облегчает считывание параметров, уровня заряда батареи и системных сообщений (лимиты, предупреждения, ошибки).



xMobility360™

xMobility360™ — это решение, применённое в новой базе операционного стола, обеспечивающее полную манёвренность и позволяющее быстро и точно устанавливать стол в операционной. В основании скрыты 4 поворотных колеса 360° с возможностью установки опционального пятого колеса — в конфигурации, вдохновлённой формой буквы X. Колёса, расположенные внутри основания, движутся в любом направлении, благодаря чему маневрирование становится плавным и не требует «восьмёрок», что ускоряет позиционирование и репозиционирование стола, особенно в ограниченном пространстве. Пространство для стоп хирурга с каждой стороны обеспечивает более лёгкий доступ к операционному полю и улучшает эргономику работы.



TotalClear™

Эффект многолетнего проектирования различных прототипов столешниц из углеродного волокна, экспериментов с типами волокон и их расположением. Благодаря многочисленным испытаниям в профессиональном измерительном институте, окончательная структура и направление расположения углеродного волокна в системе TotalClear™ позволяет уменьшить количество артефактов на изображениях. Благодаря этому ограничивается доза облучения, которая проникает в организм пациента, а риск ошибочного диагноза на основе визуализации падает до минимума. Столешница TotalClear™ - это не только очень хороший показатель прозрачности, но, прежде всего, очень четкие изображения без помех. Столешница в технологии TotalClear™ не имеет поперечных перекладин (безрамная структура), что дает полную прозрачность в пределах 360°.



fCharge™

Все элементы питания, которые питают изделия Famed Żywies, выбираются у надежного поставщика, с которым мы сотрудничаем в течение многих лет. Каждый элемент питания fCharge™ проходит контроль внешней компании, а затем проходит многократное тестирование в нескольких технологических отделах нашего завода. Встроенное зарядное устройство в наших изделиях благодаря технологии быстрой зарядки fCharge™, позволяет быстро зарядить элементы. Минимум несколько десятков гарантированных полных рабочих циклов обеспечивают безопасность во время каждой медицинской процедуры.



IntelliProtectPlus™

Столы операционные с технологией IntelliProtectPlus™ производятся из высоколегированной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали AISI 304 (обозначаемой по европейским стандартам как X5CrNi18-10 / 1.4301). Благодаря высокому содержанию никеля и хрома она характеризуется высокой устойчивостью к коррозии. Для дополнительной защиты стали мы также внедрили процессы электрополирования и пассивации. Электрополирование - это процесс, целью которого является удаление загрязнений, сглаживание и восстановление поверхности стали до соответствующего слоя пассивной защиты, защищающего ее от коррозии. Благодаря технологии IntelliProtectPlus™ на поверхностях наших изделий из стали накапливаются атомы хрома, и их структура становится более твердой. Кроме того, гладкая и блестящая поверхность обеспечивает легкость дезинфекции и ухода за изделием, а также помогает защищать от накопления пыли и грязи. Поверхности из стали с технологией IntelliProtectPlus™ при царапинах по-прежнему защищены - под воздействием атмосферного кислорода в поврежденном месте происходит пассивация, и риск коррозии в этом месте исключается. Как единственный производитель операционных столов, мы дополнительно защищаем внутренние конструкционные элементы наших изделий защитным слоем на основе цинка.



bbSafe™

Тройная защита от случайного изменения положения на пульте. Контролер после периода неактивности (регулируемого) автоматически отключается. Кроме того, процесс смены положения - двухэтапный. Система bbSafe™ также предупреждает пользователя, когда он делает движение столом, которое сильно нагружает элементы питания - это позволяет лучше прогнозировать потребляемую электроэнергию и планировать зарядку в оптимальное время. Пульт bbSafe™ имеет 2,8-дюймовый IPS экран, который позволяет быстро и точно менять положение и просматривать значения настроек в режиме реального времени. Пульт соответствует стандарту IP67.



pDetach™

Панель, размещенная на колонне, для управления операционным столом, которую можно отсоединять и пользоваться ею как обычным пультом. Она обеспечивает полную функциональность при настройке положения стола. Панель имеет удобный магнитный механизм pDetach™, который защищает его от случайного сбивания, обеспечивая при этом простую и быструю разборку.




rCover™

Встроенная в беспроводной пульт технология для защиты от помех от других беспроводных устройств, которые работают в зоне операционной. Частью системы также является специальная процедура сопряжения стола с пультом и соответственно рассчитанное ограничение мощности сигнала. Пульт в системе rCover™ оснащен емким аккумулятором и док-станцией с беспроводным зарядным устройством.



MobiWeight™

Он заботится о безопасности пациента и не разряжает чрезмерно элементы питания аккумуляторов. Он также плавно управляет настройками, медленно двигая столешницу. MobiWeight™ благодаря двойной системе регулировки высоты, позволяет съехать с помощью столешницы очень близко к полу. Большая грузоподъемность благодаря технологии MobiWeight™ также обеспечивает хорошие параметры продольного смещения и множество доступных положений.

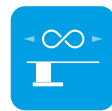

InfiniMove™

Столешница стола имеет специальные углубления для бесступенчатого монтажа дополнительных планок для аксессуаров. Главными характеристиками адаптеров InfiniMove™ являются возможность смены места сборки и быстрая разборка планок (чтобы они не мешали во время процедуры и не создавали помех во время визуализации). Адаптеры имеют на концах защелки, которые защищают аксессуары от случайного снятия.



AlterSafePro™


Резервная система управления типа override, позволяющая выполнять основные движения столешницы независимо от основного модуля управления в случае его отказа. Оснащена дополнительным независимым источником питания, обеспечивающим выполнение до 14 полных функциональных циклов операционного стола. Управление осуществляется с помощью специальной панели управления, установленной на колонне стола и оснащенной защитой от случайного включения.



	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.70)	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.60)	Famed PRIME SU-03	Famed FLARE SU-07	Famed HYPERION SU-15.5	Famed OPTIMA SU-05 (SU-05.20)	Famed ULTIMA (SU-02)	Famed SU-14
Длина	2100 мм	2060 мм	2060 мм	2200 мм	2335 мм	2100 мм	2060 мм	2030 мм
Полная ширина	600 мм	550 мм	550 мм	649 мм	630 мм	600 мм	550 мм	650 мм
Регулировка высоты	680 - 1080 мм	680 - 1080 мм	680 - 1080 мм	760 - 1160 мм	585 - 1050 мм	550 - 1020 мм	685 - 985 мм	690 - 990 мм
Положение Тренделенбурга	40°	40°	40°	16°	40°	40°	30°	20°
Обратное положение Тренделенбурга	40°	40°	40°	25°	40°	40°	30°	25°
Боковые наклоны	30°	30°	30°	20°	30°	30°	25°	20°
Продольное перемещение столешницы	400 мм	400 мм	340 мм	530 мм	400 мм	400 мм	-	-
Степень защиты	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4
Максимальная нагрузка	460 kg	460 kg	350 kg	180/230 kg	500 kg	460 kg	200 kg	200 kg



Также ознакомьтесь
с нашим портфелем
аксессуаров:

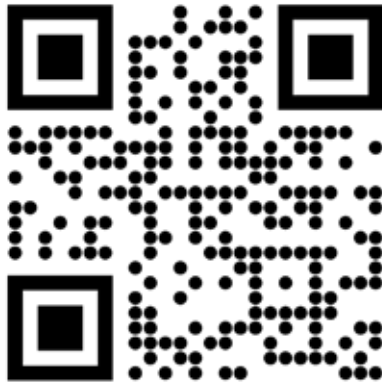



Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Офис:

tel.: +48 33 866 62 00

Продажа:

tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Редакция 124/2026/07/19. Компания Famed Żywiec оставляет за собой право модификации изделия и спецификации в связи с техническим прогрессом. Все иллюстрации, параметры и фотографии в этом материале, используется только в демонстрационных целях и могут не отображать готовое изделие. Люди на фото – не профессиональные врачи, а модели. Оборудование, представленное в каталоге, предназначено для использования в медицинских учреждениях уполномоченными лицами после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.